

beurer CM 50

H



H Anticellulitisz készülék Használati útmutató



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de

CE

Csomagolás tartalma

- Anticellulitisz készülék
- Tápegység
- Ez a használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.

Ábramagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.



FIGYELEM

Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



Útmutatás

Utalás a fontos információkra.



A készülék kétszeres védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.

1. A cellulitiszről

A cellulitisz a bőrön, főleg a felsőcomb, a felsőkar és a fenék körzetében kialakuló mélyedéseket jelenti. A cellulitisz elsősorban nőknél jön létre, mivel a nők kollagénszáalai párhuzamosan helyezkednek el a kötőszövetben. Előrehaladott cellulitisz esetén a zsírszövetek kitágulnak, így nyomást gyakorolnak kifelé, melynek következtében kialakulnak a bőr felületén a jellegzetes felületi mélyedések.

A megelőzés, ill. a csökkentés érdekében számos orvosi és kozmetikai kezelési módszer létezik, amelyek közül azonban egyik sem teljesen eredményes.

A rendszeres mozgással és kiegyensúlyozott táplálkozással egybekötött, keringést elősegítő masszázs azonban a bőr kinézetének javulását eredményezheti.

2. Ismerkedés a készülékkel

Az anticellulitisz készülék segítségével lehetővé válik a láb, a felsőkar és a fenék keringést elősegítő masszírozása, különösen cellulitisz, narancsbőr és laza kötőszövet esetén.

Az erőteljes gyúrómasszázsról nagy teljesítményű motor gondoskodik.

A komplex mozgásnak köszönhetően lehetővé válik a bőr alatti kötőszövet masszírozása és ennek következtében a vér- és nyirokkeringés elősegítése.

A készülék a gyúrófunkcióval a professzionális masszázs kézmozdulatait utánozza.

A készülék ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes otthoni használatot tesz lehetővé.

3. Rendeltetészerű használat

Ez a készülék az emberi test egyes részeinek masszírozására szolgál. A készüléket csak saját **használatra szántuk**, nem pedig orvosi vagy kereskedelmi célokra. Nem helyettesítheti az orvosi kezelést. Ne használja a masszírozó készüléket, ha a következő figyelmeztetések közül egy vagy több Önre is igaznak bizonyul! Abban az esetben ha nem biztos abban, hogy a masszírozó készülék megfelelő-e az Ön számára, kérdezze meg az orvosát!



FIGYELMEZTETÉS

A masszírozó készülék használata tilos

- állatoknál,
- a masszírozandó testtájék kóros elváltozásai vagy sérülései (pl. porckorongsér, nyílt sebek) esetén ne használja,
- szív környéki masszírozásra ha Ön szívritmus-szabályozót visel, és ezért más testtájékokra vonatkozóan is kérdezze meg az orvosát,
- dagadt, égett, gyulladásban levő vagy sérült bőr- és testfelületeken,
- szakított sebek, hajszálerek, visszértágulatok, akne, couperose, herpesz vagy más bőrbetegség esetén,

- terhesség alatt,
- az arcon (szemen), a gégefőn vagy más, különösen érzékeny testrészeken,
- ne használja a készüléket láb masszírozására,
- alvás közben,
- gyógyszerek bevétele vagy alkoholfogyasztás után (korlátozott érzékelőképesség),
- gépjárműben nem használható.

A masszírozó készülék használata előtt kérdezze meg az orvost,

- ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a felsőtestén,
- ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
- trombózis,
- cukorbetegség,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag a használati utasításban említett célra használható. A gyártó nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a károsodások szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be.

4. Biztonsági útmutatások

Gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!



FIGYELMEZTETÉS

A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.

Áramütés



FIGYELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a masszírozó készüléket is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülje az áramütést.

Ezért a készüléket

- csak a mellékelt tápegységgel és a tápegységen feltüntetett hálózati feszültséggel,
- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramhálózatról! Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a tápegységet ki akarja húzni a dugaszolóaljzatból! Soha ne tartsa vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva! Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között! A kábel ne csipődjön be, ne törjön vagy ne csavarodjon meg! Nem szabad tűt vagy hegyes tárgyakat beleszúrni.

Gondoskodjon róla, hogy a masszírozó-készülék, a kapcsoló, a hálózati egység és a kábel ne érintkezessen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal. Ezért a készüléket csak száraz, belső terekben használja (például fürdőkádban, szaunában ne).

Semmiképp se nyúljon a készülék után ha a vízbe esett! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót! Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a tartozékokon látható sérüléseket észlel. Ne tegye ki a készüléket ütéseknek, és ne ejtse le.

Javítás



FIGYELMEZTETÉS

- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!
- Ha a tápegység vagy annak vezetéke megsérült, erre felhatalmazott kereskedővel kell kicseréltetni.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

Nem rendeltetésszerű használat, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket soha ne működtesse

- lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
- benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.

Kezelés



FIGYELEM

Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a dugaszolóaljzatból.

- Nem szabad tárgyakat dugni a készülék nyílásaiba és semmit sem szabad betenni a forgó alkatrészek közé! Ügyeljen arra, hogy a mozgó alkatrészek mindig szabadon járhassanak!
- Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.

Hulladék-ártalmatlanítás



FIGYELEM

Az anyagok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanításáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!



5. A készülék ismertetése

Anticellulitisz készülék

1. Állítható csuklósíj
2. Háromállású tolókapcsoló


0 = ki

1 = lassú sebesség

2 = gyors sebesség

3. Masszázsörgők

4. Tápegység

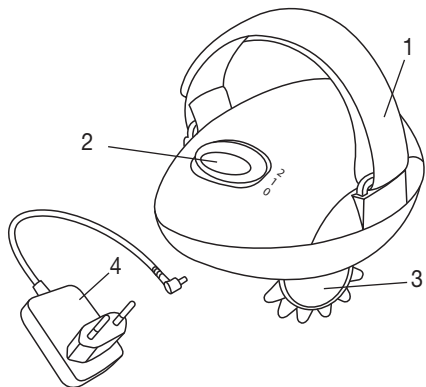

6. Üzembe helyezés

- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a dugaszoló tápegységet és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések!
- Dugja be a csatlakozódugót a masszírozó készüléken található kapcsolóhüvelybe!
- A kábelt botlásmentesen helyezze el.

7. Használat

Nyomja óvatosan a masszírozó készüléket a masszírozandó testrészhez.

Hagyja abba a masszírozást, vagy változtassa meg a testhelyzetét vagy a ráható nyomást, ha a masszírozást fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi.

Ne szorítsa vagy erőltesse be egyetlen testrészét sem – főként az ujjait – a készülék forgó masszázsgörgői közé.

Kapcsolja be a tolókapcsolóval a masszírozó készüléket. A masszázsgörgők forogni kezdenek. Választhat a lassú és a gyors sebesség között. Kikapcsoláshoz állítsa 0 helyzetbe a tolókapcsolót.

Útmutatás

- A masszírozó készüléket max. 15 percig használja. Hosszabb masszírozási idő esetén az izmok túlstimulálása ellazulás helyett túlfeszüléshez vezethet.

8. Ápolás és tárolás

Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS

- A tápegységet minden tisztítás előtt húzza ki a dugaszolóaljzatból, és vegye ki a készülékből.
- A készüléket csak a megadott módon tisztítsa! Semmiképp sem hatolhat be folyadék a készülékbe vagy a tartozékba.
- A masszázsgörgők a rájuk gyakorolt erőteljes nyomással vehetők le. A görgőráttét folyó víz alatt, öblítőszert és puha kefe segítségével tisztítható meg.
A készülék puha, enyhén benedvesített kendővel tisztítható meg.
- A készüléket csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt!

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy tárolja eredeti csomagolásába helyezve száraz környezetben úgy, hogy ne nehezedjen rá semmi.

Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ