

beurer FB 50

H



H **Lábfürdő**
Használati útmutató

Tartalom

1. Ismerkedés a készülékkel.....	3	6. Ápolás és tárolás.....	7
2. Rendeltetészerű használat	4	7. Műszaki adatok.....	8
3. Biztonsági útmutatások.....	4	8. Hulladék-ártalmatlanítás.....	8
4. Készülék ismertetése	6		
5. Használat.....	6		

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma

- Shiatsu ülésrátét
- Ez a használati útmutató

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki cseréltetnie.
- Ha víz szivárog ki a készülékből, akkor a készüléket nem szabad tovább használni.
- A készüléknek forró a felülete. A hővel szemben érzéketlen személyeknek óvatosoknak kell lenniük a készülék használatakor.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leeselkedő veszélyekre.



FIGYELEM Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



Útmutatás Utalás a fontos információkra.



A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.

1. Ismerkedés a készülékkel

Jótevény hatás a lábakon

A láb életünkben hordozó szerepet játszik – rá nehezedik egész testsúlyunk. Ezért a láb gondos ápolást igényel. Erre sokféle lehetőség kínálkozik:

- **Mágnester-terápia:** Régóta ismeretes, hogy a mágneses tér kedvező hatást gyakorol az emberi testre. A mágneses teret a mágneses térrel végzett gyógyítás során a sejtek energiaellátására használjuk fel.
- **Kneipp-féle lábfürdők:** Sebastian Kneipp egészségügyi szisztémája a hideg és meleg fürdők váltakozására épül.
- **Láb-reflexzóna masszírozása:** A láb-reflexzóna masszírozásával, amely rendkívül kedvelt masszázstechnika, a lábon alkalmazott kezelés az egész testet befolyásolja.
- **Láb-pezsgőfürdő:** Egyszerű és kedvelt alkalmazás a láb otthoni ápolására: ez a láb-pezsgőfürdő! A láb-pezsgőfürdő segítségével saját magunk tehetünk jót lábunknak, aktív módon és bármilyen gyakorissággal.

Ez a láb-pezsgőfürdő sok mindennel el van látva:

- 6 darab mágnes a lábmedencébe építve,
- masszírozást segítő lábágy,
- 3 kicserélhető lábápoló rátét:
 - Masszázsrátét,
 - Kefe,
 - Szaruréteg-eltávolító,
- 3 funkció-fokozat: vibrációs masszázs, pezsgőmasszázs és víztemperálás,
- Időzítő.

Lazítsa el magát és lábait a lábfürdő használatánál. Ez a következő jótevény hatások kibontakozásához vezethet:

- a vérellátás serkentése,
- a sejtek regenerálódásának elősegítése,
- a láb revitalizálása és élénkítése,
- a megfeszült izmok fellazítása.



Útmutatás

Az árnikát, rozmaringot vagy tengerisó-kivonatokat tartalmazó meleg lábfürdők lendületbe hozzák a keringést. A levendulás vagy kakukkfűves langyos lábfürdők áldást jelentenek az egész napos rohangálás után.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a készülék kizárólag az Ön lábainak ápolására szolgál.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a lábfürdőt

- a lábak tájékán előforduló kóros elváltozások vagy sérülések (pl. nyílt sebek, szemölcsök, lábgomba) esetén,
- állatoknál,
- 60 percnél hosszabb ideig (túlmelegedés-veszély), és újbóli használat előtt legalább 15 percig hagyja hűlni a készüléket.

A készüléket felügyelet nélkül soha ne üzemeltesse.

A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A lábfürdő használata előtt kérdezze meg orvosát, mindenekelőtt

- ha bizonytalan abban, hogy megfelelő-e az Ön számára a lábfürdő,
- ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a lábán,
- ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
- diabétesz, trombózis esetén,
- láb- ill. talpfájás (pl. visszértágulatok, vénagyulladás) esetén,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag e használati utasításban említett célra használható. A gyártót nem terheli szavatossági felelősség abban az esetben, ha szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be károsodások.

3. Biztonsági útmutatások

Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!



Útmutatás

- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!
- Kapcsolja ki azonnal a készüléket, ha használat közben valamilyen rendellenességet tapasztal, és húzza ki egyúttal a csatlakozó dugaszt a hálózati csatlakozó aljzatból. Ne kísérelje meg egyedül a készülék javítását, hanem lépjen érintkezésbe a Beurer vevőszolgálattal. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelent a készülék használója számára.
- Csak a készülékkel együtt szállított dugaszoló tápegységet használja.
- Ügyeljen arra, hogy a villamos kábelt ne fektesse éles vagy hegyes tárgyak fölé, vagy ne húzza föléljük.
- A csatlakozó dugót egy párától, nedvességtől és fröccsenő víztől védett dugaszolóaljzatba dugja bele.
- A készülék használatakor a gyermekekre felügyelni kell.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülékházat.
- Ha a készülék leasett, vagy másféle károsodásokat szenvedett, nem szabad többé használni.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!

Áramütés



FIGYELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a lábfürdőt is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülje az áramütés veszélyeit.

Ezért a készüléket

- csak a készüléken feltüntetett hálózati feszültséggel használja,
- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramhálózatról. Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a villásdugót ki akarja húzni a dugaszolóaljzatból. Soha ne tartsa, vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva. Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között.

Tilos a lábfürdőt akkor csatlakoztatni a hálózati vezetékre, amikor lába már a vízben van. Ha a készülék valahol megsérült, ez életveszélyes áramütéshez vezethet.



Biztosítsa, hogy a csatlakozó dugó és a kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal.

Ezért a készüléket

- csak száraz belső terekben használja (pl. fürdőkádban, szaunában soha),
- csak száraz kézzel fogja meg.

Ne merítse víz alá a készüléket. Semmiképp se nyúljon a készülék után, ha az a vízbe esett! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen ill. a jelen használati útmutatóval ellenkező használat esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket ne működtesse

- soha lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
- soha benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.


Kezelés





FIGYELEM

- Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a dugaszolóaljzatból.
- Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.
- Ne álljon bele a lábfürdőbe.
- A készülék feltöltéskor nem lehet rákötve a hálózati kábelre.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni!

4. Készülék ismertetése

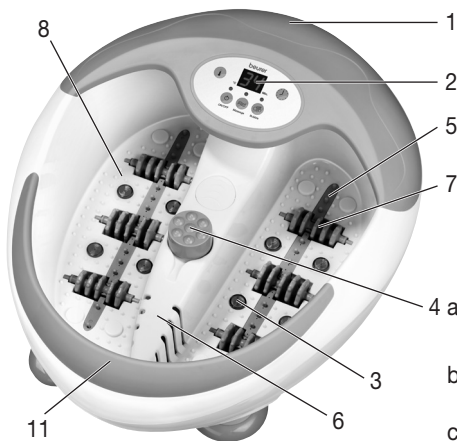


- 1 Fröccsenésvédő
- 2 LED-kijelző
- 3 Infravörös lámpa
- 4 Cserélhető pedikűr-rátétek
 - a Masszázsrátét
 - b Kefe
 - c Szaruréteg-eltávolító
- 5 Pezsgőléc
- 6 Töltésszint-jelölés
- 7 Masszázsörgők
- 8 Masszírozást segítő lábágy
- 9 Gumitalpak (készülék alsó oldala)
- 10 Kábelfeltekerés (készülék alsó oldala)
- 11 Keskeny oldal

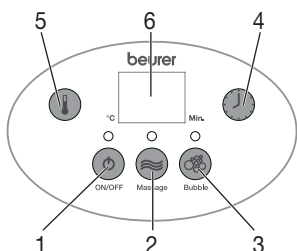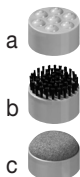

Kijelző

- 1 gomb
- 2 Masszázs-gomb
- 3 Bubble gomb
- 4 Időzítő gomb
- 5 Hőmérséklet-gomb
- 6 LC-kijelző

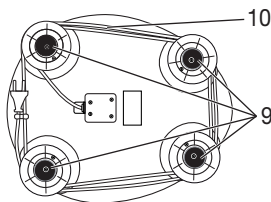

5. Használat

Üzembe helyezés

- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a dugaszoló tápegységet és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések.
- Mielőtt bedugja a lábfürdőt, teljesen töltsse fel meleg vízzel a töltési szintjelölésig (kb. 5–6 cm magasan).
- Most csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
- A kábelt botlásmentesen helyezze el.

Vegyen fel kényelmes ülő testhelyzetet, és helyezze lábait enyhe nyomással a masszírozást segítő lábágyra. Soha ne álljon bele a lábágyba. A készülék elcsúszását a készülék alján lévő gumilábak akadályozzák meg.

Most kapcsolja be a készüléket a gomb megnyomásával, és állítsa be a kívánt funkciót:

Vibrációs masszázs

Nyomja meg a masszázsgombot (2) a vibrációs masszázs bekapcsolásához. A lábfürdő vibrálni kezd. Hozza érintkezésbe a talpát a masszázsnoppokkal, és növelje vagy csökkentse a nyomást a kívánt masszírozó hatás eléréséhez.

Pezsgőmasszázs

Nyomja meg a Bubble gombot (3), amivel aktiválja a levegő-bevezetést a pezsgőlécbe a kellemes pezsgőmasszázsához.

Időzítő

Az időzítővel beállíthatja a kívánt időt (20–60 perc). Ehhez nyomja meg az időzítő gombot (4), hogy mindig 10 perccel növelje az időszakaszt. Az időzítő gyárilag 20 percre van állítva. A beállított idő letele után a lábfürdő automatikusan kikapcsol. A maximális időtartam 60 perc. Újbóli üzembe helyezés előtt először hagyja 15 percig hűlni a készüléket.

Hőmérséklet

A kijelzőn megjelenik az aktuális vízhőmérséklet. A hőmérséklet megváltoztatásához addig nyomja az 5-ös gombot, amíg be nem állította a kívánt víztemperálást (35, 38, 42, 45, 48 °C). A hőmérséklet a 35–42 °C tartományban a legkellemesebb, a maximális hőmérséklet 48 °C.

A hőmérséklet gyárilag 35 °C-ra van beállítva

Mágneses mező és infravörös lámpa

A lábfürdő 6 mágnessel és 8 infravörös lámpával rendelkezik, amelyek be vannak építve a lábfürdőbe, serkentik a vérkeringést, valamint stimulálják a reflexónákat.

Masszírozó görgők

Úgy érhet el különösen jó masszírozó hatást, hogy a lábait előre-hátra mozgatja a lábágyban beépített 6 masszírozó görgőn. Arra is lehetőség van, hogy kivegye a masszírozó görgőket. Ez úgy történhet, hogy a görgőket erősen felfelé húzza.

Cserélhető rátétek

A kívánt rátétet tegye rá a középén levő, erre a célra szolgáló szerkezetbe. A lábával könnyedén nyomja lefelé a rátétet, hogy aktiválja a forgató motort.

A **kefe-rátétet** arra lehet használni, hogy stimulálja a reflexónákat a talpon.

A **masszázs-rátét** gondoskodik a talpak kellemes masszírozásáról, és segíti a vérkeringést.

A **szaruréteg-eltávolító** az elhalt hámszövetek és bőrkeményedések eltávolítására szolgál.

A forgató motor túlmelegedés elleni védelemmel és maximális teherbírással rendelkezik. Túlterhelés vagy túlmelegedés esetén a motor leáll. A motor lehűlése után lehet ismét használni a forgató funkciót.

Útmutatás

- A talp egy bizonyos pontjának masszírozásával hatást lehet gyakorolni a test különböző szerveire. Azt tanácsoljuk azonban, hogy a reflexóna pontjainak masszírozása előtt szerezzen be információt a szakirodalomból és orvosánál is, hogy elérje az Ön számára kívánt hatást.
- A lábfürdőt víz nélkül is lehet használni.

Használat után ürítse le a vizet a lábfürdő keskeny oldalán (11). Kerülje el, hogy víz érje a kijelzőt.

6. Ápolás és tárolás

Használat után csapvízzel mossa ki a készüléket.

A masszírozó pezsgő lábfürdőt enyhe – nem súroló – hatású háztartási tisztítószerrel is kimoshatja, mint pl. közömbös ecet.

A lévezetékek kiszáritásához a tisztítás után kapcsolja be kb. 1 percre víz nélkül a pezsgőfokozatot.

Útmutatás

- Ügyeljen rá, hogy ne hatoljon be víz a készülék belsejébe!
- A lábfürdőt eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni.

7. Műszaki adatok

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
220-240 V ~ 50/60 Hz 390 W

8. Hulladék-ártalmatlanítás

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

