

# beurer

# FC 100



**H** Pureo Derma Peel Bőrcsiszolás  
Használati útmutató

CE



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

## Tartalomjegyzék

1. A készülék ismertetése .....	3
2. Jelmagyarázat.....	3
3. Rendeltetésszerű használat .....	3
4. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók .....	4
5. A készülék leírása .....	5
6. Alkalmazás .....	6
6.1 Bőrteszt végrehajtása .....	6
6.2 A használat módja .....	6
6.3 Alkalmazási területek .....	7
7. Tisztítás és karbantartás .....	8
8. Gyakran ismétlődő kérdések.....	8
9. Ártalmatlanítás.....	8
10. Műszaki adatok.....	8
11. Pót- és kopóalkatrészek .....	9

## A csomag tartalma

- 1x FC 100 alapállomás
- 1x Kézi készülék
- 1x Precíziós feltét
- 1x Érdes feltét
- 1x Nagy feltét
- 20x Egyszer használatos szűrő
- 1x Hálózati adapter
- jelen használati útmutató



## FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 18 év alatti személyek nem használhatják!
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.

## Tisztelt Vásárlóink!

Nagyon köszönjük, hogy termékeink egyikét választotta. Nevünk garanciát jelent a kiváló minőségű és részletesen ellenőrzött termékekre a hőkezelés, a lágy terápia, a vérnyomásmérés/diagnosztika, a testsúlymérés, a masszázs, a szépségápolás és a légtérápia területén. Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.










Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!  
Az Ön Beurer-csapata.

## 1. A készülék ismertetése

A Pureo Derma Peel FC100 lehetővé teszi a professzionális arcbőr-hámlasztást a mikrodermabráziós technológia révén. Kiváló minőségű zafírbevonat segítségével lágyan távolítjuk el a felesleges bőrrészecskéket; a legmodernebb vákuumtechnológiával érezhetően javul a bőr állapota, s ez támogatja a vérellátást is. Emellett fokozza a sejtek megújulását is, emiatt a bőr felszíne összességében finomabbnak és simábbnak tűnik.

## 2. Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a készüléken használt szimbólumok:

	<b>FIGYELMEZTETÉS</b> Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ
	<b>FIGYELEM</b> Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére
	<b>VESZÉLY</b> A készüléket nem szabad víz közelében vagy vízben használni (pl. mosdókagylóban, tusolóban, fürdőkádban) – elektromos áramütés veszélye!
	<b>Megjegyzés</b> Fontos információkra vonatkozó megjegyzések
	Vegye figyelembe a használati útmutatót
	A készülék kettős védőszigetelésű,
	Ártalmatlanítás az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerint
	Gyártó
	Csak zárt terekben használja

## 3. Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag felnőtt emberi arcon szabad alkalmazni (kivéve a szem és a száj körüli részeket). Ne használja állatokon a készüléket!

A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

## 4. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

### FIGYELMEZTETÉS

- Fulladásveszély a csomagolóanyag miatt. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek-e látható sérülések. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.
- Tartsa távol víztől a hálózati adaptert.

### VESZÉLY

A készüléket nem szabad víz közelében vagy vízben használni (pl. mosdókagylóban, tusolóban, fürdőkádban) – elektromos áramütés veszélye!

### FIGYELMEZTETÉS

**NE** használja a készüléket

- repedezett bőrön.
- nyílt seben.
- szem körüli részeken vagy a szájon.
- a test más részén az arcot kivéve (kivéve a szem körüli részeket és a száját).
- bőrbetegség esetén (pl. herpesz, érbetegségek vagy bőrburjánzás).
- ha bőrrákban szenved.
- bőrirritáció esetén.
- közvetlenül napfürdő után vagy leégés esetén.
- ha szteroid tartalmú gyógyszereket szed.
- ha vérhígítót szed.
- ha a következő betegségek egyikében szenved: sclerosis multiplex, cukorbetegség, vagy autoimmun megbetegedések.

### FIGYELMEZTETÉS

Ezért a készüléket csak a mellékelt tápegységgel és a tápegységen feltüntetett hálózati feszültséggel.


### FIGYELEM

Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Zavar vagy károsodás esetén minősített szakemberrel javíttassa meg a készüléket.

### FIGYELMEZTETÉS

- Csak száraz, belső helyiségekben használja a készüléket (pl. fürdőkádban, szaunában soha).
- Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne érje ütés a készüléket, és ne ejtse le.
- Ne szorítsa be a hálózati kábelt.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a hálózati adapter ne érintkezessen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal.

## 5. A készülék leírása

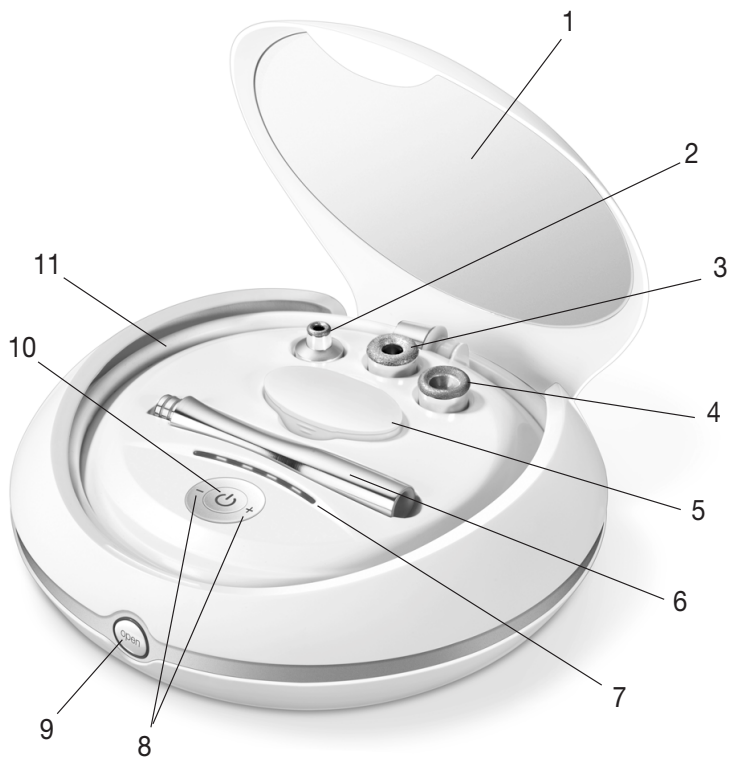

1. Tükör	7. Az intenzitási fokozatok kijelzője (1-5. szint)
2. Precíziós feltét finom zafír bevonattal, mely kis felületen való precíz kezelést tesz lehetővé (pl. az orr területén)	8. +/- gombok az intenzitási fokozat beállításához
3. Nagy feltét finom zafírbevonattal, mely érzékeny bőrhöz alkalmas.	9. Nyitó gomb
4. Érdes feltét érdes zafír bevonattal, mely a problémás zónák intenzív kezelésére alkalmas.	10. BE/KI gomb
5. Tároló doboz egyszer használatos szűrővel	11. Tömítő
6. Kézi készülék	

## 6. Alkalmazás

### Megjegyzés

Mielőtt a használatot megkezdéné, ügyeljen rá, hogy az arcbőr legyen tiszta, száraz, és mentes minden olyan anyagtól, mint a púder, krém, vagy smink.

### 6.1 Bőrteszt végrehajtása

A használat előtt 24 órával végezzen a készülékkel bőrtesztet. Ehhez a készüléket a legalacsonyabb intenzitási fokozattal használja a nyakon egy kicsi, nem feltűnő helyen. Ha a vizsgált terület 24 óra múltán pirosas vagy fájdalmas lenne, ne használja a készüléket.

### FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket ne használja heti egy alkalomnál gyakrabban.
- Közvetlenül a kezelés után a kezelt arcbőrön enyhe pír, nagyon ritka esetben kis bőrvérzés léphet fel.
- Az alkalmazás előtt és után egy napig kerülje az izzasztó tevékenységeket, a szaunát, szoláriumot és a napozást.

### Megjegyzés

Nem érzékeny, problémás bőrön a készülék hetente kétszer is használható (a kezelések között legalább 48 óras szünettel).

### 6.2 A használat módja

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékbe és a fali aljzatba.

2. A készülék nyitásához nyomja meg a **nyitó gombot**.





3. A tömlő végébe tegyen be egy egyszer használatos szűrőt.

4. Kösse össze a tömlő végét a kézi készülékkel.

5. Helyezze fel a kívánt feltétet a kézi készülék csúcsára.

6. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **BE/KI gombot**. Ekkor az intenzitási fokozatok kijelzője világítani kezd. Ön ekkor a legalacsonyabb intenzitási fokozatot kapcsolta be.

7. Az alkalmazást először a legalacsonyabb intenzitási fokozaton kezdje. Helyezze a kézi készüléket az arcbőrére és vezesse végig rajta. Ügyeljen arra, hogy a kézi készülék egynél többször ne menjen át az arc egyazon részén. A kezelés további részleteit a „6.3 Alkalmazási területek” fejezet tartalmazza.

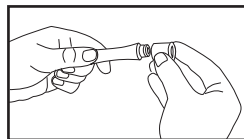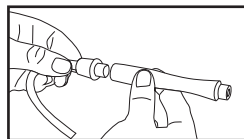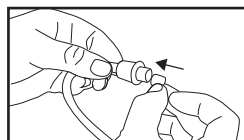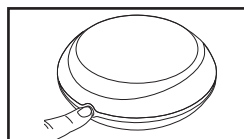

Ha Önnek a legalacsonyabb intenzitási fokozat túl gyenge, akkor a **-/+ gombok** megnyomásával módosíthatja.




### **i** Megjegyzés

**Az alkalmazott nyomás legyen kellemes, ne okozzon fájdalmat. Használat után előfordulhat, hogy enyhe bőrpír látható.**

8. Ha az alkalmazást befejezte, kapcsolja ki a készüléket a **BE/KI gomb** megnyomásával és húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból.

9. Minden használat után cserélje ki az egyszer használatos szűrőt. Ehhez húzza le a kézi készüléket a tömlőről. Távolítsa el az egyszer használatos szűrőt egy csipesszel.

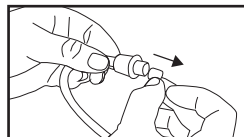

## **6.3 Alkalmazási területek**

### **i** Megjegyzés

**Ügyeljen arra, hogy a kezelendő arcfelület feszes legyen, miközben a kézi készüléket a bőrön vezeti.** Ezt úgy érheti el, ha a szabad kezével a bőrt lefelé és oldalt feszesre húzza.

#### **Homlok:**

Haladjon lassan és egyenletesen a kézi készülékkel a homlok közepétől kifelé. Ügyeljen arra, hogy egyetlen bőrrészt se kezeljen többször.



#### **Halánték:**

Haladjon a kézi készülékkel kifelé a hajtövei irányába. Ismétlje meg ezt az orr bal és jobb oldalán. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 1 cm távolságban legyen a szemétől.



#### **Orr:**

Haladjon a kézi készülékkel az orrnyereg felső részétől középen lefelé. Ismétlje meg ezt az orr bal és jobb oldalán.



#### **Arc:**

Haladjon a kézi készülékkel kifelé az arca mentén.



#### **A száj körül:**

Haladjon a kézi készülékkel a felső ajaknál középtől balra és jobbra. Haladjon a kézi készülékkel az alsó ajaktól balra és jobbra felfelé. Ügyeljen arra, hogy az ajkakat közvetlenül ne érintse!



## 7. Tisztítás és karbantartás

- Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket!
- Fertőtlenítse a felteket minden használat után a kereskedelemben kapható fertőtlenítőszerrel.
- Minden használat után cserélje ki az egyszer használatos szűrőt.
- Szennyeződés esetén a készüléket száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Védje a készüléket az ütközéstől, a nedvességtől, a portól, a vegyszerektől és az erős hőmérséklet-ingadozásoktól, és ne tartsa hőforrások (kályhák, fűtőtestek) közelében.

## 8. Gyakran ismétlődő kérdések

### A Pureo Derma Peel FC100 minden bőrtípushoz alkalmas?

A Pureo Derma Peel FC100 minden bőrtípushoz alkalmas. Egyaránt alkalmas zsíros és száraz, valamint vegyes bőrre. Minden bőrszínhez is alkalmas.

### A Pureo Derma Peel FC100 készülékbe beépített technológia biztonságos?

A Pureo Derma Peel FC100 veszélytelen mikrodermabráziós technológia alapján működik. Csak a külső bőrréteg felesleges bőrrészecskéit távolítja el, az egyéb bőrrétegeket nem támadja meg.

### A Pureo Derma Peel FC100 alkalmazása fájdalmas?

Nem, a Pureo Derma Peel FC100 alkalmazásának kíméletesnek és fájdalommentesnek kell lennie. Nagyon érzékeny bőrnél ritka esetekben enyhe égető érzés fordulhat elő. Ha az alkalmazás során ennek ellenére Ön fájdalmat érez, csökkentse az intenzitást.

### Meddig tart egy kezelés a Pureo Derma Peel FC100 készülékkel?

A kezelés időtartama a kezelendő területtől függően változhat. Az arcon végzett teljes kezelés kb. 20 percig tart.

### Milyen gyakran használjam a Pureo Derma Peel FC100 készüléket?

Azt javasoljuk, hogy a Pureo Derma Peel FC100 készüléket hetente egyszer használja, és a kezelések között legalább 48 óráig várakozzon. Nem érzékeny, problémás bőrnél a készüléket hetente kétszer is lehet alkalmazni. Az alkalmazás hatását előtte feltétlenül tesztelni kell. Használat után óvja a bőrt a naptól.

### Mire kell ügyelni kezelés után?

Ha kezelést követően 3 napon belül napra megy, használjon napvédő krémet. A kezelést követő 3 napon NE alkalmazzon mechanikai/kémiai hámlasztást, elektrolízist vagy arcszörtelenítést, és NE használjon szőrtelenítő szereket. Sminkelni közvetlenül a kezelés után is szabad.

## 9. Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni.

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználadott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



## 10. Műszaki adatok

Energiaellátás tápegységről	Bemenet: 100-240V AC, 50/60 Hz Kimenet: 12V, 600mA
Méretetek	Ø 21,5 x 8,8 cm
Súly	~869 g



## 11. Pót- és kopóalkatrészek

A pót- és kopóalkatrészeket az adott szerviz címén a megadott anyagszámmal szerezheti be.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
20 db egyszer használatos szűrő	163.546
Precíziós feltét	163.557
Érdes feltét	163.556
Nagy feltét	163.555







# Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház  
[www.gyogyexpressz.com](http://www.gyogyexpressz.com)

