

beurer FM 150



H Vénatréner
Használati útmutató.....2

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetészerű használat	4	7.2 A használat befejezése	9
2. A készülék ismertetése	4	8. Tisztítás és tárolás	10
3. Használati tudnivalók	4	8.1 A lábmandzsetták tisztítása	10
4. Biztonsági tudnivalók	4	8.2 Tárolás	10
5. A készülék leírása	7	9. Ártalmatlanítás	10
6. Üzembe helyezés	7	10. Mi a teendő probléma esetén?	10
6.1 Üzembe helyezés elemes működés esetén	7	11. Műszaki adatok	11
6.2 Üzembe helyezés hálózati egységről történő működés esetén	7	12. Hálózati egység	11
7. Alkalmazás	8		
7.1 Alkalmazás megkezdése	8		

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta. Nevünk garanciát jelent a kiváló minőségű és részletesen ellenőrzött minőségi termékekre olyan területeken, mint a hő-, súly-, vérnyomás-, testhőmérséklet- és pulzusz mérés, valamint a kímélő terápiák, masszázs, levegőtisztítás, szépségápolás és csecsemőgondozás.

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!
Az Ön Beurer-csapata



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használok számára is hozzáférhetővé.



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy nem működik megfelelően. Ilyen esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy arra felhatalmazott kereskedő végezhet.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.

Jelmagyarázat


A használati útmutatóban és a készüléken használt szimbólumok:

	FIGYELMEZTETÉS Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ.		Megengedett szállítási hőmérséklet és páratartalom
	FIGYELEM Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére.		Hálózati egység
	Megjegyzés Fontos információkra vonatkozó megjegyzések.	IP 21	≥ 12,5 mm átmérőjű idegen testek és függőlegesen csepegő víz ellen védett
	Vegye figyelembe a használati útmutatót		Egyenáram
	Gyártó		Sorozatszám
			Alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás
	II. védelmi osztály		Ártalmatlanítás az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerint
	BF típusú alkalmazói rész	EAC	Tanúsítványi jel olyan termékekhez, amelyeket az Oroszországi Föderációba vagy a FÁK országába exportálnak.
	Megengedett üzemi hőmérséklet és páratartalom		
	Megengedett tárolási hőmérséklet és páratartalom		

A csomag tartalma

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérüléseit, és ellenőrizze a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a vénatréneren vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések, és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy hívja az útmutatóban megadott szervizvonalat.

- 2 x Lábmandzsetta
- 2 x Levegőtömlő
- 1 x Kézi kapcsoló
- 1 x Tárolótáska
- 4 x AA elem (1,5V)
- 1 x Hálózati egység
- 1 x Ez a használati útmutató

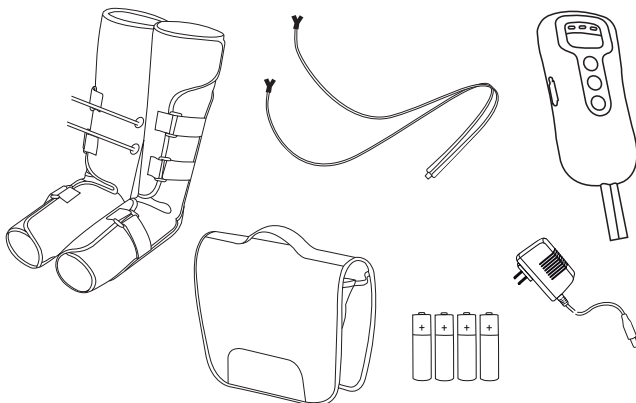

1. Rendeltetésszerű használat

A vénatrénert kizárólag emberek lábán szabad használni. A vénatréner kizárólag **saját** használatra szolgál. A vénatréner **NEM** alkalmas kereskedelmi használatra. Nem helyettesíti az orvosi kezelést.



FIGYELMEZTETÉS

A készüléket kizárólag arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és úgy, amilyen módon az ebben a használati útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem felel a szakszerűtlen vagy helytelen használatból származó károkért.

2. A készülék ismertetése

Ki ne találkozott volna még ezzel a problémával: Egy hosszú, nehéz nap után nehéznek és duzzadtnak érezzük a lábainkat. Ez azért van, mert túl keveset mozgunk vagy lábaink hosszabb időn keresztül egyoldalúan vannak terhelve (pl. sok ülés az irodában, egy hosszú repülőúton, vagy hosszú ideig tartó állás).

Ezek a tünetek megelőzhetők a vénatréner revitalizáló kompressziós masszírozásával. Ez a kompressziós masszírozás a következőképpen működik: Gyenge vagy beteg vénák esetén a vénabillentyűk nem záródnak megfelelően. A vér lesüllyed. A kompressziós masszírozás segítségével helyreáll a vénabillentyűk működése. Javul a vér szív felé történő véráram.

A revitalizáló kompressziós masszírozás a beépített leeresztő és felfúvódó légszakokkal rendelkező két lábmandzsettával történik, amelyek fokozzák a vérkeringést. A fokozatmentesen állítható masszázs/légnyomásintenzitás segítségével a vénatrénert saját igényeire szabhatja.

A lábmandzsetták váltott oldalú felfúvódásának segítségével csökkenthető a lábak duzzadt és elnehezült érzete. Ezenkívül enyhítheti a lábszár és a lábfej izommerevedését. A visszerek és seprűvénák kialakulása így megakadályozható. Mindemellett javítja a vénás vérkeringést is a vénafunkció helyreállításával.

A lábmandzsetták kényelmesen illeszkednek a lábhoz, köszönhetően az egyedi beállítást biztosító tépőzárnak. Kompakt kivitelének és a csomagban található hordtáskának köszönhetően a vénatréner otthon és útközben egyaránt használható.

3. Használati tudnivalók

- A vénás vérkeringés javítására.
- A visszerek és seprűvénák kialakulásának megelőzésére.
- A lábak elnehezedésének és duzzanatainak csökkentésére.
- Sport miatt fellépő izomfeszülés kezelésére.
- Sportsérülések, például zúzódások és ficamok kezelésére.
- Véraláfutás kezelésére.

Felhasználók: 18 és 60 éves kor közötti felnőttek

Használat helye: zárt térben

4. Biztonsági tudnivalók

A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a vénatrénert

- a lábakat érintő kóros elváltozások vagy sérülések esetén (pl. törékeny csontozat, nyílt sebek, stb.),
- terhesség alatt,
- alvás közben,
- állatokon,
- olyan tevékenységek közben, amelyeknél veszélyesek lehetnek az előre nem látható reakciók,
- olyan szerek bevétele után, amelyek korlátozzák az észlelőképességét (pl. fájdalomcsillapító gyógyszerek, alkohol),

- 30 percnél hosszabb ideig (túlhevülés veszélye), és az újabb használat előtt hagyja legalább 20 percig hűlni a vénatréner,
- akut betegek vagy orvosi kezelés alatt álló személyeken.

Ha bizonytalan abban, hogy alkalmas-e az Ön számára a vénatréner, kérje ki orvosa tanácsát.

A vénatréner használata előtt kérje ki az orvosa véleményét, főként akkor,

- ha súlyos betegségben szenved vagy operációt hajtottak végre a lábán,
- ha szívritmus-szabályozót, implantátumokat vagy egyéb segédeszközöket visel,
- trombózis vagy annak gyanúja esetén,
- ha cukorbeteg,
- ha ismeretlen eredetű fájdalmai vannak,
- ha akut gyulladásos panaszai vannak,
- ha szívelégtelenségben szenved és vízesednek a lábai,
- előrehaladott artériás megbetegedés esetén,
- tüdőödéma esetén,
- magas vérnyomás esetén,
- rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén.



FIGYELMEZTETÉS

- Jelen terméket az égési sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében tilos nagyfrekvenciás készülékekkel együtt használni.
- Biokompatibilitás. A pácienssel vagy felhasználóval kapcsolatba kerülő anyagok semelyike sem hordoz kockázatot a használatra nézve. Termékeink megszokott anyagokból készülnek.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érjen az egyenáramú tápegységhez.
- Használat közben helyezze a kézi kapcsolót a test mellé.
- A termékkel bánjon körültekintően, hogy az nehegy leessen és Ön nehegy megsérüljön.
- Az alábbi listán szereplő személyeknek a termék használatát megelőzően fel kell keresniük orvosukat: Terhes, menstruáló nők, érzékeny bőrű személyek, szívbeteg, vérnyomás-rendellenességben, rosszindulatú daganatban, agyi érrendszeri betegségben szenvedők, akut megbetegedésben szenvedő, vagy orvosi kezelés alatt álló személyek.
- A bőr érzékelőképessége vagy nyomásérzékelő képesség zavarában szenvedők jelen terméket nem használhatják.
- Ne használja a terméket fürdés vagy alvás közben.
- Agyvérzésben szenvedő páciensek: Ne használja a terméket labilis állapotban levő betegnél. Másodlagos megbetegedésekben szenvedő betegek a készüléket csak orvosi felügyelet mellett használhatják.
- Gennyes gyulladásos megbetegedésekben, akut szepszisben és folyamatos hipertermiában szenvedők nem használhatják a terméket.
- Akut szív- és érrendszeri, valamint agyi érrendszeri betegségekben szenvedők nem használhatják a terméket.
- A terméket kizárólag a lábain és talpain használja. A lábakon és talpakon fellépő bőrbetegségekben szenvedők nem használhatják a terméket.
- A termék használata során ne járjon vagy mozogjon, mivel ez a páciens sérüléséhez vezethet. Ezenfelül a termék sérülését is okozhatja.
- Ne használja a terméket gyermekek vagy a tudat valamely zavarában szenvedő egyének közelében.
- Ha a termék használata során a felhasználó megsérülne, a használatot azonnal meg kell szakítani, és fel kell keresnie orvosát.
- Ne használja a terméket egyéb orvosi elektromos készülékekkel, pl. szívritmus-szabályozókkal, szív-tüdő gépekkel vagy egyéb létfenntartó elektromos készülékekkel, elektrokardiográfokkal és egyéb orvosi elektromos készülékekkel együtt. Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyt okozhat.
- A hibák és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne szedje szét, javítsa, vagy módosítsa ezt a terméket.
- Vészhelyzet esetére a terméket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozót egyszerűen oldalra el lehessen távolítani.



FIGYELEM

- Ha a vásárló jelen terméket nagyfrekvenciás sebészeti készülékekkel együtt használja, az a készülék károsodásához vezethet. Ha a terméket terápiás rövidhullámú vagy mikrohullámú készülékek közelében (1 m) használja, a termék adott esetben nem működik megbízhatóan.
- A gyártó engedélye nélkül ne hajtson végre módosításokat a készüléken.
- Válassza le a terméket annak használatát követően vagy használaton kívül az elektromos hálózatról.

- Ne használja a terméket magas hőmérséklettel rendelkező, gyulladásveszélyes, elektromágneses sugárzással vagy magas páratartalommal rendelkező helyiségekben.



FIGYELMEZTETÉS: Áramütés

Minden más elektromos készülékhez hasonlóan ezt a vénatrénert is óvatosan kell használni, hogy elkerülhetők legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.

Ezért a vénatrénert

- csak a vele együtt szállított hálózati egységgel és a típustáblán megadott hálózati feszültséggel használja,
- sohase használja, ha láthatóan sérült a készülék vagy valamelyik tartozéka,
- sohase használja vihar esetén.

Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a vénatrénert és válassza le az elektromos hálózatról. Soha ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a hálózati egységet a dugaszolóaljzatból. Soha ne tartsa vagy hordozza a készüléket a kábelénél fogva. Tartson elegendő távolságot a kábelek és meleg felületek között. Ne szorítsa be, törje meg, vagy csavarja el a kábelt. Ne szúrjon bele tűt vagy éles tárgyakat. Semmilyen körülmények között se nyissa fel a kézi kapcsolót.

Gondoskodjon arról, hogy a készülék, a kézi kapcsoló és a kábel ne érintkezessen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal.

Csak száraz, belső helyiségekben használja a készüléket (pl. fürdőszobában, szaunában SOHA).

Sohase nyúljon a vénatrénert után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszoló aljzatból. Ne használja a vénatrénert, ha látható sérülések vannak rajta vagy a tartozékain. Ne érje ütés a készüléket, és ne ejtse le.



FIGYELMEZTETÉS: Javítás

Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálatához vagy egy hivatalos kereskedőhöz.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély

A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén adott körülmények között tűzveszély állhat fenn!

Ezért a készüléket ne használja

- letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt,
- benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.



FIGYELMEZTETÉS: Elemek

- Ha az elemcella folyadék a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
- Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polarításra.
- Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtartót.
- Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Az elemeket mindig egyidejűleg cserélje ki.
- Ne használjon akkumulátorokat!
- Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.






FIGYELEM: Használat

Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek megtörve a levegőtömlők.
- Ne üljön vagy álljon teljes súllyal a lábmandzsettákra. Ne tegyen semmit a lábmandzsettákra vagy a kézi kapcsolóra.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.

5. A készülék leírása

1. Levegőbeömlő („in”)
2. Áramcsatlakozás
3. Levegőkiömlő
4. BE/KI gomb
5. Levegőkieresztés gomb
6. Stop gomb*
7. 10/20/30 perces időzítő gombbal
8. Levegőtömlők
9. Levegőtömlő csatlakozó

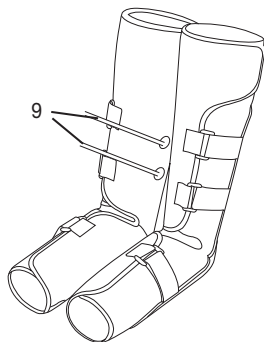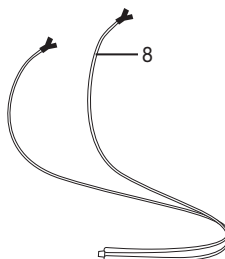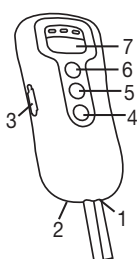

(*A stop gomb megszakítja a felpumpálást kellemetlen és magas nyomás esetén)

6. Üzembe helyezés

- Távolítsa el a csomagolást.
- Távolítsa el a lábmandzsetták tépőzárján levő kék védőfóliát.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati egységet és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.
- A vénatréner elemről (4 x 1,5 V-os AA LR06 típusú alkáli elem) vagy a csomagban található hálózati egységről működtethető.

6.1 Üzembe helyezés elemes működés esetén


1. Nyissa ki a kézi kapcsoló hátoldalán található elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be 4 darab 1,5 V-os AA (LR06 típusú alkáli) elemet. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az elemek a jelölésüknek megfelelően, a helyes polaritással legyenek behelyezve. Ügyeljen az elemtartó rekeszben látható rajzra. Ne használjon újratölthető elemeket.
3. Zárja vissza a kézi kapcsoló hátoldalán található elemtartó rekeszt úgy, hogy az hallhatóan és érezhetően be-kattanjon.

6.2 Üzembe helyezés hálózati egységről történő működés esetén

Megjegyzés

Mielőtt hozzálátna a hálózati egységről történő működés melletti üzembe helyezéshez, győződjön meg róla, hogy nincsen elem a kézi kapcsolóban.

1. Csatlakoztassa a hálózati egységet a kézi kapcsolóhoz az ábrán látható módon.
2. A hálózati egység másik végét dugja be egy megfelelő hálózati aljzatba.
3. A vénatréner most használatra kész állapotban van.

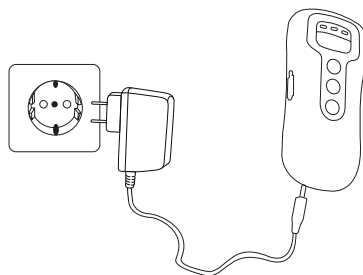

7. Alkalmazás

7.1 Alkalmazás megkezdése

FIGYELEM:

- Használat közben kerülje a lábmandzsetta tépőzárának kioldását, mert ez befolyásolhatja a készülék működését. Csak akkor oldja ki a lábmandzsetta tépőzárát, ha használat közben a lábaira ható nyomás kellemetlenné válik, vagy nyomja meg a stop gombot.
- Ügyeljen arra, hogy a használat során ne legyenek megtörve a levegőtömlők.
- Ügyeljen rá, hogy a használat során a lábmandzsettát ne fedje le takaróval vagy más hasonló tárggyal.


1. Tartsa be az „Üzembe helyezés” fejezetben foglalt utasításokat.

2. Helyezze a lábmandzsettákat az ábrán látható módon egymás mellé szorosan a csupasz lábra vagy szűk ruhaneművel (pl. harisnya) fedett alsó lábszárra és lábfejre.

A lábmandzsetták csak annyira feküdjenek fel, hogy még két ujj beférjen a mandzsetták alá. Ha túl szorosnak érzi a lábmandzsettákat, helyezze fel azokat úgy, hogy a tenyere még beférjen azok alá.


3. Az optimális eredmény elérése érdekében a használat során tartsa lábait enyhén hajlított szögben/megemelve, hogy ezzel elősegítse a véráramlást.

- A bal lábra való lábmandzsettát annak belső oldalán egy „L” betű jelöli.
- A jobb lábra való lábmandzsettát annak belső oldalán egy „R” betű jelöli.

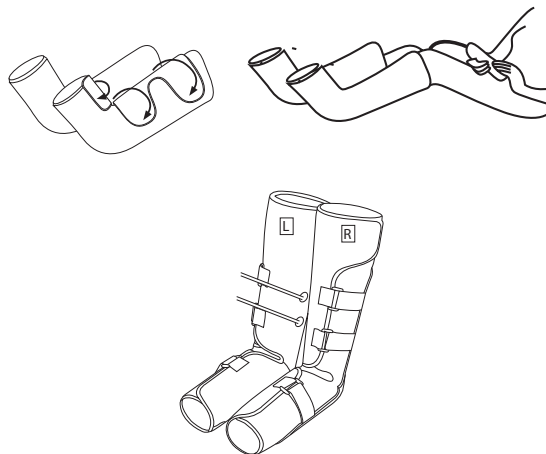

4. Csatlakoztassa a levegőtömlőt a lábmandzsettához. Ügyeljen rá, hogy a levegőtömlők szorosan illeszkedjenek és ne tudjanak lecsúszni.

Csatlakoztassa a levegőtömlő másik végét a kézi kapcsoló levegőbeömlőjéhez („in”).

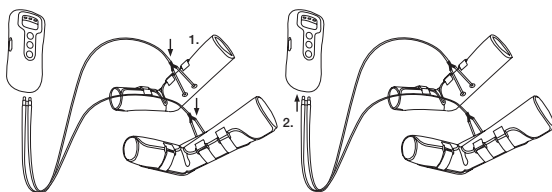


5. Nyomja meg a BE/KI gombot a vénatréner bekapcsolásához. Amíg a készülék be van kapcsolva, a 20 perces időzítő LED világít.


6. Vegyük figyelembe, hogy az időzítő-beállítás módosításával az időzítő újratekdi a számlálást.

FIGYELEM

A javasolt használati idő 20-30 perc. Ennél hosszabb használat a lábak zsibbadásához és a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

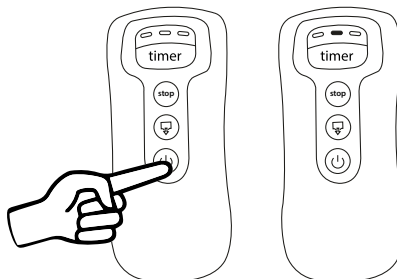

7. Állítsa be a levegőnyomás szabályozójával a kívánt intenzitást. Először kezdje a legacsonyabb fokozattal, hogy lassan hozzászokjon a masszírozáshoz. Az optimális hatáshoz a beállított intenzitást erősnek, de még kellemesnek kell éreznie.

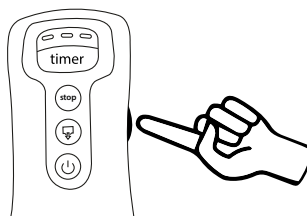

Megjegyzés


A vénatrénér egymás után és felváltva elkezdí a lábák masszírozását. A lábák egyidejű masszírozására nincs lehetőség. Ez nem jelenti a készülék hibás működését.

A készülékben kikapcsoló automatika van, amely maximum 30 perc üzemidőre van beállítva.


7.2 A használat befejezése

A használat befejezéséhez először kapcsolja ki a készüléket, majd engedje ki a levegőt a lábmandzsettákból. Ehhez a következőképpen járjon el:


1. A kézi kapcsoló BE/KI gombjának megnyomásával kapcsolja ki a vénatrénert. A beállított időzítő LED kialszik. A készülék ekkor 30 másodpercre készenléti üzemmódba kapcsol. Ezalatt mindhárom időzítő LED világít.

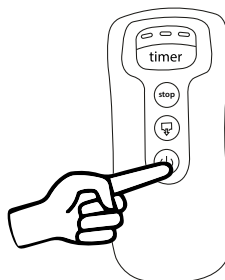

2. A 30 másodperces készenléti üzemmód alatt húzza ki a levegőtömlőt a kézi kapcsolóból és dugja be az oldalsó levegőkiömlőbe (☞) a kézi kapcsolón, és nyomja meg a levegőkieresztő gombot [5]. Ezalatt mindhárom időzítő LED villog. Újra kialszanak, ha a folyamat befejeződik.

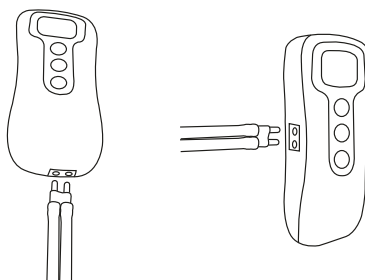

3. Oldja ki a tépőzárat és vegye le a lábmandzsettákat. Húzza ki a levegőtömlőket az „Y-csatlakozónál” fogva a lábmandzsettákból úgy, hogy a tömlővégek az ábrán látható módon a lábmandzsettákba bedugva maradjanak. Ha a készüléket a hálózati egységgel üzemeltette, húzza ki azt a hálózati aljzatból és a kézi kapcsolóból.

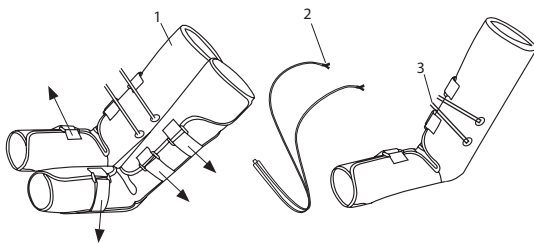

8. Tisztítás és tárolás

8.1 A lábmandzsetták tisztítása

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a levegőtömlőket (a kis tömlővégek kivételével) a lábmandzsettákból és a kézi kapcsolóból.
- Tisztítsa meg a lábmandzsettákat puha, kissé megnedvesített ronggyal. A tisztításhoz ne használjon vegyi tisztító- vagy súrolószert.
- Csak akkor használja újra a lábmandzsettákat, ha azok már teljesen megszáradtak.

8.2 Tárolás

- Vegye ki az elemeket a kézi készülékből, ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket. A szivárgó elemek károsíthatják a készüléket.
- Ne törje meg élesen a levegőtömlőket és a lábmandzsettákat.
- A készüléket hűvös, jól szellőző helyen tárolja annak eredeti csomagolásában.

9. Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Erre Önt törvény kötelezi.

A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek:

Pb = az elem ólmot tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.



10. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Lehetséges okok	Elhárítás
A lábmandzsetták nem fűjódnak fel	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket a kézi kapcsolóban.
	Nincs bedugva a hálózati egység	Csatlakoztassa a hálózati egységet alkalmas fali aljzatba.
	Nincs megfelelően csatlakoztatva a levegőtömlő	Helyezze be újból a levegőtömlőket.
Használat közben villogni kezdenek az időzítő LED-ek, a készülék pedig kikapcsol	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket a kézi kapcsolóban.

Ha problémáját nem találja az alábbi felsorolásban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

11. Műszaki adatok

Mandzsettanyomás	max. 130 mmHg (a 7.1. fejezetben leírt helyes használat esetén)
Mandzsetta mérete	29–53 cm
Időzítő időtartama	10–30 perc $\pm 10\%$ -os eltéréssel
Tápfeszültség elemes üzemmód esetén	6V DC (4 x 1,5V  AA elem (alkáli LR06))
Megengedett üzemi feltételek	+5 °C–+40 °C, 15–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Megengedett tárolási feltételek	-25 °C–+70 °C, 0–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Megengedett szállítási feltételek	-10 °C–+40 °C, 15–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Méreték	Lábmandzsetta: 61 x 67 x 0,5 cm Kézi kapcsoló: 17 x 7,7 x 3 cm
Összsúly	kb. 1400 g (hálózati egység nélkül)
Érintésvédelmi osztály	
Osztályozás	BF típus 

12. Hálózati egység

Tápfeszültség hálózati üzem esetén	Bemenet: 100–240V~, 50/60 Hz; 200 mA Kimenet: 6V DC, 500 mA
Polaritás	
Érintésvédelmi osztály	

Vonatkozó szabványok

A termék a következő szabványoknak és szabályozásoknak felel meg:

- EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 Gyógyászati villamos készülékek – 1. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények.
- EN 60601-1-11: 2010 Gyógyászati villamos készülékek – Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények – Kiegészítő szabvány: A lakókörnyezeti egészségügyi ellátásban használatos gyógyászati villamos készülékek és a gyógyászati villamos rendszerek követelményei.
- EN 60601-1-2: 2015 Gyógyászati villamos készülékek – 1-2. rész: Az alapvető biztonságra vonatkozó általános követelmények – Kiegészítő szabvány: Elektromágneses összeférhetőség – Követelmények és vizsgálatok.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ