



HK Comfort

H Fűthető párnák
Használati utasítás



A címke jelmagyarázata



Az útmutatások elolvasása!



Ne használja összehajtogatva vagy
összegyűrve!



Ne szúrjon bele tűt!



De bij dit apparaat gebruikte stoffen
Az ennél a készüléknél használt
textíliák teljesítik az Öko-Tex szab-
vány 100 magas humánökológiai
előírásait, amint ezt a Forschungs-
institut Hohenstein (Hohenstein
Kutatóintézet) igazolja.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat. Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléssel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma: 1 melegítőpárna, 1 kapcsoló, ez a használati útmutató

1. Fontos biztonsági utasítások – gondosan olvassa el és őrizze meg a későbbi használatához

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (áramütés, bőrmegégés, tűz). Az alábbi biztonsági és veszély esetére vonatkozó útmutatások nem csak a saját ill. harmadik személyek egészségének védelmére szolgálnak, hanem a termék megóvásáért is. Ezért vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, és az árucikk továbbadása esetén adja át ezt az útmutatót is!

- Ezt a melegítőpárnát kizárólag az ebben a használati útmutatóban felsorolt célokra használja.
- Ezen melegítőpárnát nem kórházi alkalmazásra tervezték.
- Ez a melegítőpárna nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket.
- Az önségélyre képtelenek, kisgyermekek vagy megre érzékeny személyek (pl. cukorbeteg, kezelés alatt álló, betegség okozta bőrelváltozással vagy sebhelyes bőrfelülettel rendelkező személyek, fájdalomcsillapító gyógyszerek bevétele vagy alkohol fogyasztását követően) ne használják.
- A túlságosan hosszú ideig történő használat bőrgéshez vezethet.
- Figyelem! Semmi esetre se aludjon el, miközben a melegítőpárna üzemel.
- Ne alkalmazza a melegítőpárnát olyan testrészek esetén, melyek be vannak gyulladva, sérültek vagy meg vannak dagadva. Kétség esetén használat előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- A melegítőpárna okozta elektromos és mágneses mezők bizonyos körülmények között befolyásolhatják szívritmus-szabályozójának működését. Ennek ellenére jóval a határértékek alatt helyezkednek el: A térerősség mértéke: max. 5000 V/m, a mágneses térerősség: max. 80 A/m, a mágneses folyadéksűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, hogy ezért kérdezze meg orvosát és szívritmus-szabályozójának gyártóját e melegítőpárna használata előtt.
- Ezt a melegítőpárnát

- kizárólag a műszeren rögzített feszültségre kapcsolja
- csak a melegítőpárnán megadott kapcsolótípusokkal üzemeltesse.
- ne hagyja őrizetlenül működni
- ne kapcsolja be összegyűrt vagy összehajtott állapotban
- ne szorítsa össze
- ne hajlítsa meg éles ívben
- ne alkalmazza állatok esetében
- ne használja nedves állapotban.
- A melegítőpárna kapcsolójában található elektronikus alkatrészek használat közben enyhén felmelegíthetik a kapcsolót. A kapcsolót ezért tilos letakarni vagy a melegítőpárnára helyezni, amennyiben az használatban van.
- Ne húzza a vezetékeknél fogva, ne csavarja és ne hajlítsa meg élesen.
- Ne szúrjon tűt és hegyes tárgyakat ebbe a melegítőpárnába.
- Ezt a melegítőpárnát nem használhatják gyermekek, kivéve akkor, ha a kapcsolót a szülő vagy a felvigyázó személy előre beállította, és kellőképpen elmagyarázta a gyermeknek, hogyan lehet működtetni ezt a melegítőpárnát.
- A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva, hogy ne játsszanak a melegítőpárnával.
- Ellenőrizze gyakran a melegítő párnát arra nézve, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhasználódás vagy károsodás jelei. Ilyen jelek esetén, vagy ha szakszerűtlenül használták ezt a melegítő párnát, a további használata előtt el kell vinnie a gyártó vagy a kereskedő céghez.
- Ha megsérült a melegítő párna hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, az ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Javításokat kizárólag szakemberek vagy a gyártó által elismert javítóműhelyek végezhetnek, mivel különleges szerszámok szükségesek hozzá. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2. Szakszerű használat

Ennek a melegítőpárnának a rendeltetése az emberi test felmelegítése. Célzatosan tud meleget sugározni. A meleg segíti a vérkeringést és ellazítja az izomzatot. Ezt a melegítőpárnát nem kórházi vagy ipari célú alkalmazásra tervezték. Különösen csecsemőket, kisgyermeket, melegre érzékeny vagy önségélyre nem képes személyeket, valamint állatokat tilos melegíteni vele. „Lélegző” microfleece anyagból készült melegítő párnáink sokoldalúan használhatók, és jól alkalmazkodnak a bőrhöz. A kapcsoló levehető, ezért a melegítő párna mosógépben is tisztítható (lásd a tisztítási útmutatót).

Első használatkor a melegítőpárna műanyag szagot bocsáthat ki, mely azonban rövid időn belül elmúlik.

3. Működtetés

3.1 Biztonság

Ez a melegítőpárna BIZTONSÁGI RENDSZER-rel rendelkezik. Ez az elektromos érzékelő-technika megakadályozza a melegítőpárna túlhevítését annak teljes felületén úgy, hogy hiba esetén automatikusan kikapcsol. Amennyiben hiba esetén a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a melegítőpárnát, a jelzőlámpa a melegítőpárna bekapcsolt állapotában már nem világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy biztonsági okokból hiba esetét követően nem lehet használni a melegítőpárnát, és el kell küldeni a megadott szerviz-címre.

3.2 Üzembe helyezés

Először ellenőrizze, hogy a kapcsoló a dugós csatlakozó révén össze van-e kötve a melegítőpárnával! Majd dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba!

3.3 A hőmérséklet beállítása

Abban az esetben éri el a melegítőpárna a leggyorsabb bemelegedést, ha egyből a legmagasabb hőmérsékletfokozatra állítja azt. Igény esetén később vissza lehet állítani. A melegítőpárna bekapcsolása után röviden felvillan a kapcsolófokozat – ez idő alatt a melegítőpárna öntesztet végez. Ezután a kapcsolófokozat tartósan megvilágított lesz. U slučaj u dugotrajnog, stalnog korištenja termoelektričnog jastuka, preporučujemo najnižu temperaturu.

3.4 Hőmérsékleti skála

Fokozat:	0	kikapcsolva
	1	minimális hőmennyiség
	2	közepes hőmennyiség
	3	maximális hőmennyiség

3.5 Kikapcsoló automatika

A melegítő párnák kikapcsoló automatikával vannak felszerelve, amely a meleg hozzávetetését a melegítő párna üzembe helyezése után kb. 90 perccel leállítja. Ezt követően a működésjelző villogni kezd. A melegítő párna újbóli bekapcsolásához a fokozatkapcsolót előbb „0” állásba kell állítani. Körülbelül 5 másodperc elteltével ismét be lehet kapcsolni a párnát. Ha az eltelt idő utáni kikapcsolást követően a melegítő párnát már nem használja, kapcsolja ki („0” fokozat), vagy húzza ki a hálózati dugaszt a dugaszoló aljzataból.



3.6 Gyorsmelegítés


Ezek a melegítő párnák gyorsmelegítő funkcióval rendelkeznek, amely az első 10 percen belül gyors felmelegítést eredményez.



4. Tisztítás és ápolás

A melegítőpárna tisztítása előtt mindig húzza ki a dugós csatlakozót a dugaszolóaljzataból.

A melegítőpárnán levő kisebb foltok kendővel vagy nedves szivaccsal és esetleg kevés folyékony finommosószerrel távolíthatók el. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!

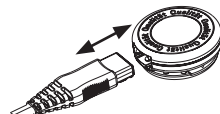

Vegye figyelembe, hogy a melegítőpárnát nem szabad vegyi úton tisztítani, kicsavarni, gépben szárítani, kimángorolni vagy vasalni.

Mosás előtt először vegye le a dugós csatlakozót, és vele együtt a kapcsolót a melegítőpárnáról! Állítsa be a mosógépet 30°C-os kímélő mosás programra!

Ökológiai szempontok miatt javasoljuk, hogy a melegítő párnát csak más textíliákkal együtt mossa. Használjon finommosószert, és azt a gyártó útmutatása szerint adagolja.

Ne feledje, hogy a melegítő párnákat igénybe veszi a túl gyakori mosás. Ezért a melegítő párnát teljes élettartama alatt ne mossa 10-nél többször mosógépben.

Szárításhoz ne rögzítse a melegítő párnát ruhacsipesszel vagy más hasonló eszközzel, és szárításhoz semmiképpen se kapcsolja be a melegítő párnát!

A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a melegítő párnával, ha a dugós csatlakozó és a melegítő párna is már teljesen megszáradt.

5. Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a melegítőpárnát, azt ajánljuk, helyezze el eredeti csomagolásába száraz környezetbe, ahol nincs útban. Tároláskor semmilyen tárgyat se tegyen a melegítő párnára, hogy elkerülje az éles megtörését.

Várja meg, amíg a melegítőpárna előbb lehűl!

6. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ