

# beurer

## MG 70

H



**H** **Infravörös masszírozó**  
**Használati utasítás**

## Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más használok számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.


Szívélyes üdvözléssel  
az Ön Beurer csapata

## 1. Fontos tudnivalók

- Csatlakoztassa a készüléket a típusablán megadott feszültségű elektromos hálózatra.
- Mint minden elektromos géppel, az alábbi masszírozó-készülékkel is nagyon körültekintően kell bánni, hogy elkerülje az elektromos áram jelentette veszélyeket:
  - Közvetlenül a használatot követően áramtalanítsa a készüléket!
  - Soha ne érjen víz a készülékhez (kivéve a nedves kendővel történő tisztításkor)!  
Semmiképp se kerüljön víz a készülék belsejébe. Ne tegye vízbe a készüléket! Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzás közben, úszómedencében vagy bármilyen vízzel töltött medence felett. Ha mégis víz kerülne a borítás alá a készülékbe, úgy azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon szakkereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz!
  - Minden használat előtt győződjön meg a készülék sérülésmentességéről.
  - Sérülés esetén semmiképp se csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra!  
Forduljon szakkereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz!
  - Az esetleges javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy a kirendelt kereskedők végezhetik.
  - Soha ne tartsa vagy vigye a készüléket a hálózati kábelénél fogva!
  - Amennyiben használat közben zavar lépne fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljából!
- A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban megadott célra tervezték. A gyártót nem lehet felelősségre vonni a nem rendeltetésszerű, vagy figyelmen kívül hagyásból következő károkért.
- A mellékelt masszírozó-feltéteken kívül más feltétet ne használjon a készülékhez.
- A készülék csak saját használatra való, nem gyógyászati vagy ipari felhasználásra készült.
- 20 pernél hosszabb ideig ne használja a készüléket egyfolytában, így elkerülheti a túlmelegedést. Az újbóli használat előtt hagyja a készüléket kihűlni.
- Használat során a készülék felülete felmelegszik. A hőre érzékeny személyeket ezért kérjük, különös körültekintéssel használják a készüléket!
- A bekapcsolt készüléket soha ne fedje le (takaró, párnák, ...)!  
• Soha ne dugjon tárgyakat a nyílásokon keresztül a készülékbe! Ügyeljen arra, hogy a mozgó alkatrészek mindig szabadon mozoghassanak, és semmilyen tárgy vagy esetleg az ujjak ne csipődjenek be! Arra is ügyeljen, hogy a haja ne akadjon bele a készülékbe!  
Adott esetben használjon hajhálót!
- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a készüléket a hálózatról, ha a markolatot vagy a masszírozó feltéteket leveszi vagy felteszi!
- Felügyelet nélkül ne hagyja üzemelni a készüléket, főleg, ha az gyerekek közelében található!
- Gyermek, mozgásképtelenek vagy fogyatékosok csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket, vagy használat előtt tájékoztatni kell őket az üzemeltetés módjáról.
- Kisállatok / állatok kezelésére nem használható!
- Kérjük a szívritmus-szabályzót viselőket, hogy használat előtt kérjék orvosuk véle ményét, és semmiképp se masszírozzák a szív területét!
- Soha nem használja a készüléket duzzadt, égett vagy sérült test- és bőrfelületeken.

- ! Ezen felül nem szabad masszírozni: a csontokat (pl. hajlatok, gerincoszlop), fejet, sem más érzékeny testrészeket.
- Ne alkalmazzon masszázst a következő esetekben: lázas megbetegedések, izomgörcsök, trombózisok, vénagyulladás, sárgaság, diabétesz, terhesség, idegi eredetű megbetegedések (pl.: isiász,) vagy akut gyulladások. A fenti esetekben kérdezze meg orvosát!
- Ne használja a készüléket az ágyban! Használat közben semmiképp se aludjon el!

## 2. Készülék-leírás

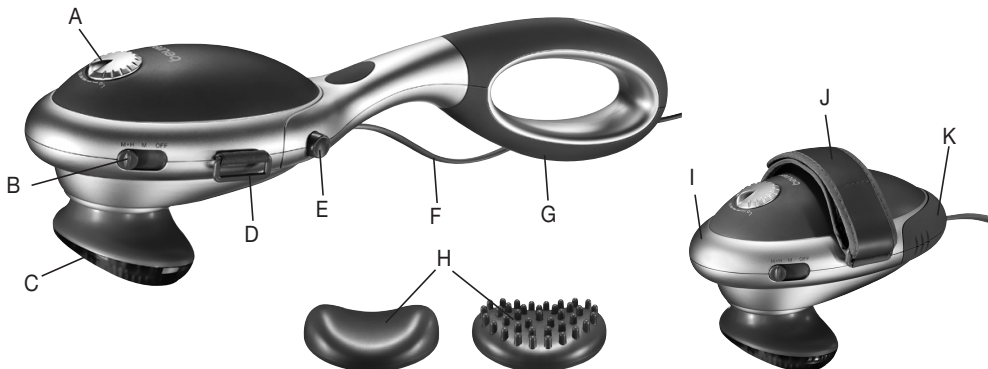

- A Szabályzó (fokozat nélkül állítható masszírozási sebesség)
- B Tológombos kapcsoló:  
OFF – Ki  
M – Masszírozás  
M+H – Masszírozás és infravörös melegítés
- C Masszírozó felület infravörös melegítéssel
- D Tartó a kézbújtató számára
- E Gombok a markolat rögzítéséhez
- F Hálózati kábel
- G Csúszásmentes, levehető markolat
- H Cserélhető masszírozó feltétek:  
– puha feltét  
– csúcsos feltét
- I Masszírozó fej
- J Kézbújtató pánt
- K Rátűző elem

## 3. Használat

Rendeltetés: A készülék kizárólag az emberi test masszírozására szolgál.

Döntse el, hogy a masszírozást felrakott markolattal szeretné-e végezni, vagy a készüléket markolat nélkül, kézbújtatóval kívánja-e használni! A markolat levételéhez a markolat rögzítésére szolgáló mindkét gombot jól benyomva kell tartani. Ezután a masszírozó fejről le kell húzni a markolatot. Most vezesse be a rátűző elemet a masszírozó fej hátsó részén, hogy elfedje a markolat felrakására szolgáló szerkezetet! Dugja át a kezét a kézbújtató pánt alatt! A tépőzárral állítsa be a kézbújtató pánt hosszát úgy, hogy a masszírozó fejet tenyérrel át tudja fogni, és biztosan kézben tudja tartani!

Ha újra vissza szeretné tenni a markolatot, először kihúzással távolítsa el a rátűző elemet, ezután tegye vissza a markolatot amíg hallhatóan be nem pattan! A hálózati kábel a markolatrögzítő alatt jön ki.

A masszírozást masszírozó feltéttel vagy anélkül végezheti el. Ehhez tetszése szerint válasszon ki egy masszírozó feltétet! „M+H“ infravörös melegítéssel végzett hőkezelés esetén a feltett masszírozó feltétek akadályozzák az infravörös-sugárforrás hőátadását. Ezért a készüléket csak „M“ állásban használja, ha masszírozó feltét van rajta!

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hálózati kábelt!

Kapcsolja be a készüléket a tologombos kapcsolóval

„M“ – „csak masszírozás“ vagy

„M+H“ – „masszírozás infravörös melegítéssel“ pozícióba állítva!

Állítsa be a kívánt masszírozási sebességet a szabályzó segítségével! Helyezze a készüléket a masszírozandó testfelületre! Közben állhat, ülhet vagy feket, masszírozhatja saját magát vagy egy másik személyt. A masszírozás intenzitását úgy változtathatja, hogy a masszírozó készüléket erősebben vagy kevésbé erősen nyomja a testfelületre. Egy meghatározott testrészt csak legfeljebb 3 percig masszírozzon, majd térjen át egy másik testrészre! Maximum 20 perc használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót, és hagyja a készüléket lehűlni! A készüléket száraz helyen tárolja!

#### 4. Tisztítás

A tisztítást csak áramtalanított gépen szabad elvégezni. Egy enyhén benedvesített törölkendővel dörzsölje át a készüléket. Enyhe tisztítószereket is használhat. Figyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerülhessen víz.

Ezután a készüléket csak teljesen megszáradt állapotban szabad ismét használni.

#### 5. Leselejtezés

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



# Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház  
[www.gyogyexpressz.com](http://www.gyogyexpressz.com)

