

beurer

MG 80 MG 81

H



H **Masszírozó-készülék**
Használati utasítás

Tisztelt Vásárló!

Örömünkre szolgál, hogy kínálatunk egyik termékére esett a választása. Nevünk kiváló minőségű és többszörösen bevizsgált minőségi –a hő, finomterápia, vérnyomás / diagnózis, testsúly, masszázs és levegőtisztítás területén használatos - termékeket fémjelez.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót, és használat során vegye figyelembe az utasításokat!


Szívélyes üdvözzel:
Az Ön Beurer-csapata

1. Fontos tudnivalók

A kezelési útmutatót őrizze meg későbbi használatra, illetve tegye más felhasználók számára is hozzáférhetővé.

- Csatlakoztassa a készüléket a típus táblán megadott feszültségű elektromos hálózatra.
- Mint minden elektromos géppel, az alábbi masszírozó-készülékkel is nagyon körültekintően kell bánni, hogy elkerülje az elektromos áram jelentette veszélyeket:
 - Közvetlenül a használatot követően áramtalanítsa a készüléket!
 - Soha ne érjen víz a készülékhez (kivéve a nedves kendővel történő tisztításkor)! Semmiképp se kerüljön víz a készülék belsejébe. Ne tegye vízbe a készüléket! Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzás közben, úszómedencében vagy bármilyen vízzel töltött medence felett. Ha mégis víz kerülne a borítás alá a készülékbe, úgy azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon szakkereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálatához!
 - Minden használat előtt győződjön meg a készülék sérülésmentességéről.
 - Sérülés esetén semmiképp se csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra! Forduljon szakkereskedőjéhez vagy az ügyfélszolgálatához!
 - Az esetleges javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy a kirendelt kereskedők végezhetik.
 - Soha ne tartsa vagy vigye a készüléket a hálózati kábelénél fogva!
 - Amennyiben használat közben zavar lépne fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljból!
- A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban megadott célra tervezték. A gyártót nem lehet felelősségre vonni a nem rendeltetésszerű, vagy figyelmetlen használatból következő károkért.
- A mellékelt masszírozó-feltéteken kívül más feltétet ne használjon a készülékhez.
- A készülék csak saját használatra való, nem gyógyászati vagy ipari felhasználásra készült.
- 20 pernél hosszabb ideig ne használja a készüléket egyfolytában, így elkerülheti a túlmelegedést. Az újbóli használat előtt hagyja a készüléket kihűlni.
- Használat során a készülék felülete felmelegszik. A hőre érzékeny személyeket ezért kérjük, különös körültekintéssel használják a készüléket!
- A bekapcsolt készüléket soha ne fedje le (takaró, párnák, ...!)
- Felügyelet nélkül ne hagyja üzemelni a készüléket, főleg, ha az gyerekek közelében található!
- Gyermekek, mozgásképtelenek vagy fogyatékosok csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket, vagy használat előtt tájékoztatni kell őket az üzemeltetés módjáról.
- Kisállatok / állatok kezelésére nem használható!
- Kérjük a szívritmus-szabályzót viselőket, hogy használat előtt kérjék orvosuk véleményét, és semmiképp se masszírozzák a szív területét!
- Soha nem használja a készüléket duzzadt, égett vagy sérült test- és bőrfelületeken. Ezen felül nem szabad masszírozni: a csontokat (pl. hajlatok, gerincoszlop), fejet, sem más érzékeny testrészeket.
- Ne alkalmazzon masszázst a következő esetekben: lázas megbetegedések, izomgörcsök, trombózisok, vénagyulladás, sárgaság, diabétesz, terhesség, idegi eredetű megbetegedések (pl.: isiász,) vagy akut gyulladások. A fenti esetekben kérdezze meg orvosát!
- Ne használja a készüléket az ágyban! Használat közben semmiképp se aludjon el!

2. Termékleírás

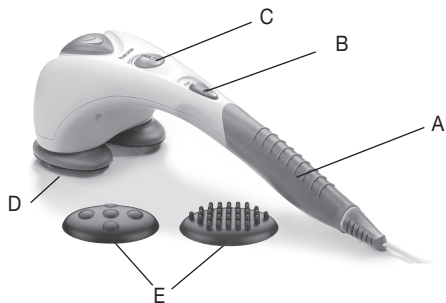

- A Csúszásmentes markolat
- B Tológombos kapcsoló
OFF – Ki
M – Masszírozás
MH – Masszírozás és
infra-melegítés
- C Szabályzó (fokozat nélkül állítható
masszírozó-sebesség)
- D Masszírozó-felület infravörös
melegítéssel
- E Cserélhető masszírozófeltétek:
- Csúcsos feltét
- Ötpontos feltét

3. Használat

Rendeltetés: A készülék kizárólag az emberi test masszírozására szolgál.

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hálózati kábelt!

Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a tologombot „ON” – „Massage” pozícióba állítja.

A szabályzó segítségével állítsa be a kívánt masszírozási sebességet!

Helyezze a készüléket egy vagy két kézzel a masszírozandó testfelületre. A kezelés közben állhat, ülhet vagy feket. Masszírozhatja saját magát, illetve egy másik személyt is. Ha a készüléket a bőrfelületre nyomja, változtathatja a masszírozás intenzitását. Egy-egy testrészt maximum 3 percig masszírozzon, ezután térjen át egy másik testrésze.

Max. 20 perc használat húzza ki a csatlakozót a dugaljából, és hagyja kihűlni a készüléket. Az eszközt száraz helyen kell tartani.

4. Tisztítás/Leselejtezés

A tisztítást csak áramtalanított gépen szabad elvégezni. Egy enyhén benedvesített törölkendővel dörzsölje át a készüléket. Enyhe tisztítószeret is használhat. Figyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerülhessen víz. Ezután a készüléket csak teljesen megszáradt állapotban szabad ismét használni.

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

