


beurer FB 20

H

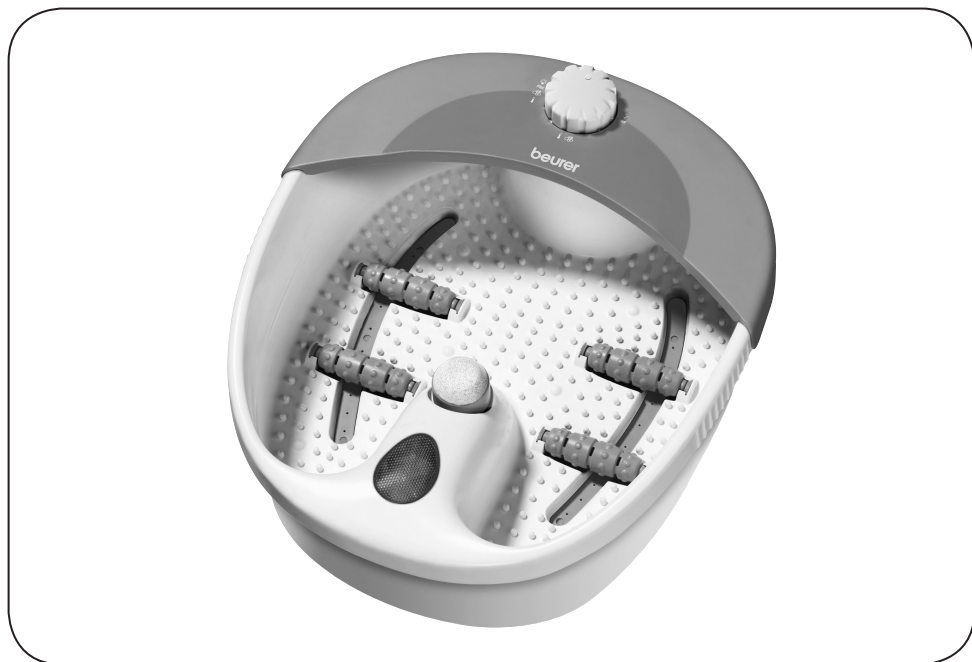

H **Lábfürdő**
Használati útmutató

Tartalom

1. Ismerkedés a készülékkel.....	3	6. Ápolás és tárolás	7
2. Rendeltetésszerű használat	3	7. Műszaki adatok	7
3. Biztonsági útmutatások.....	4	8. Hulladék-ártalmatlanítás.....	7
4. Készülék ismertetése	6		
5. Használat.....	6		

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléssel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma

- Shiatsu ülésrátét
- Ez a használati útmutató

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Ha víz szivárog ki a készülékből, akkor a készüléket nem szabad tovább használni.
- A készüléknek forró a felülete. A hővel szemben érzéketlen személyeknek óvatosaknak kell lenniük a készülék használatakor.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.



FIGYELEM Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



Útmutatás Utalás a fontos információkra.



A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.

1. Ismerkedés a készülékkel

Jótevény hatás a lábakon

A láb életünkben hordozó szerepet játszik – rá nehezedik egész testsúlyunk. Ezért a láb gondos ápolást igényel. Erre sokféle lehetőség kínálkozik:

- **Kneipp-féle lábfürdők:** Sebastian Kneipp egészségügyi szisztémája a hideg és meleg fürdők váltakozására épül.
- **Láb-reflexzóna masszírozása:** A láb-reflexzóna masszírozásával, amely rendkívül kedvelt masszázstechnika, a lábon alkalmazott kezelés az egész testet befolyásolja.
- **Láb-pezsgőfürdő:** Egyszerű és kedvelt alkalmazás a láb otthoni ápolására: ez a láb-pezsgőfürdő! A láb-pezsgőfürdő segítségével saját magunk tehetünk jót lábunknak, aktív módon és bármilyen gyakorisággal.

Ez a láb-pezsgőfürdő sok mindennel el van látva:

- masszírozást segítő lábágy,
- 3 kicserélhető lábápoló rátét:
 - Masszázsrátét,
 - Kefe,
 - Szaruréteg-eltávolító,
- 3 funkció-fokozat: vibrációs masszázs, pezsgőmasszázs és víztemperálás,
- Infravörös lámpa.

Lazítsa el magát és lábait a lábfürdő használatánál. Ez a következő jótevény hatások kibontakozásához vezethet:

- a vérrellátás serkentése,
- a sejtek regenerálódásának elősegítése,
- a láb revitalizálása és élénkítése,
- a megfeszült izmok fellazítása.



Útmutatás

Az árnikát, rozsmaringot vagy tengerisó-kivonatokat tartalmazó meleg lábfürdők lendületbe hozzák a keringést. A levendulás vagy kakukkfűves langyos lábfürdők áldást jelentenek az egész napos rohangálás után.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a készülék kizárólag az Ön lábainak ápolására szolgál.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a lábfürdőt

- a lábak tájékán előforduló kóros elváltozások vagy sérülések (pl. nyílt sebek, szemölcsök, lábgomba) esetén,
- állatoknál,

- 20 percnél hosszabb ideig (túlmelegedés-veszély), és újbóli használat előtt legalább 15 percig hagyja hűlni a készüléket.

A készüléket felügyelet nélkül soha ne üzemeltesse.

A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A lábfürdő használata előtt kérdezze meg orvosát, mindenekeelőtt

- ha bizonytalan abban, hogy megfelelő-e az Ön számára a lábfürdő,
- ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a lábán,
- diabétesz, trombózis esetén,
- láb- ill. talpfájás (pl. visszértágulatok, vénagyulladás) esetén,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag e használati utasításban említett célra használható. A gyártót nem terheli szavatossági felelősség abban az esetben, ha szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be károsodások.

3. Biztonsági útmutatások

Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!

Útmutatás

- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!
- Kapcsolja ki azonnal a készüléket, ha használat közben valamilyen rendellenességet tapasztal, és húzza ki egyúttal a csatlakozó dugaszt a hálózati csatlakozó aljzatból. Ne kísérelje meg egyedül a készülék javítását, hanem lépjen érintkezésbe a Beurer vevőszolgálattal. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelent a készülék használója számára.
- A villamos kábelt ne húzza meg, ne csavarja el, és ne törje meg. Nem szabad tűt vagy hegyes tárgyakat beleszúrni.
- Ügyeljen arra, hogy a villamos kábelt ne fektesse éles vagy hegyes tárgyak fölé, vagy ne húzza föléljük.
- A csatlakozó dugót egy párától, nedvességtől és fröccsenő víztől védett dugaszolóaljzatba dugja bele.
- Feltöltéshez nem szabad a lábfürdőt zuhanyozó tálcába, fürdőkádba vagy mosdókagylóba helyezni.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülékházat.
- Ha a készülék leesett, vagy másféle károsodásokat szenvedett, nem szabad többé használni.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!

Áramütés



FIGYELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a lábfürdőt is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülje az áramütés veszélyeit.

Ezért a készüléket

- csak a készüléken feltüntetett hálózati feszültséggel használja,

- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramhálózatról. Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a villásdugót ki akarja húzni a dugaszolóaljzathból. Soha ne tartsa, vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva. Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között.

Tilos a lábfürdőt akkor csatlakoztatni a hálózati vezetékre, amikor lába már a vízben van. Ha a készülék valahol megsérült, ez életveszélyes áramütéshez vezethet.



Biztosítsa, hogy a csatlakozó dugó és a kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal.

Ezért a készüléket

- csak száraz belső terekben használja (pl. fürdőkádban, szaunában soha),
- csak száraz kézzel fogja meg.

Ne merítse víz alá a készüléket. Semmiképp se nyúljon a készülék után, ha az a vízbe esett! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tűzveszély



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen ill. a jelen használati útmutatóval ellenkező használat esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket ne működtesse

- soha lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
- soha benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.


Kezelés




FIGYELEM

- Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a dugaszolóaljzathból.
- Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.
- Ne álljon bele a lábfürdőbe.
- A készülék feltöltéskor nem lehet rákötve a hálózati kábelre.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni!

4. Készülék ismertetése

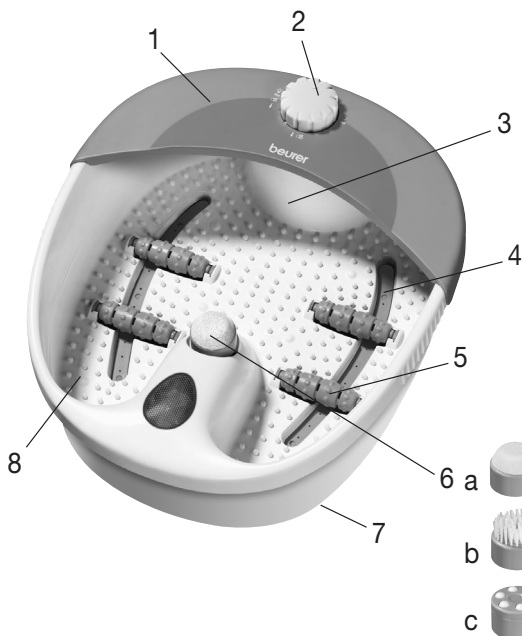

1. Freccsenésvédő
2. Forgókapcsoló
3. Töltésszint-jelölés
4. Pezsgőléc
5. Masszírozó görgős kiegészítés
6. Cserélhető pedikűr-rátétek
 - a Szaruréteg-eltávolító
 - b Kefe
 - c Masszázsrátét
7. Gumilábak (készülék alsó oldala)
8. Masszírozást segítő lábágy
9. Kábelfeltékerés (készülék alsó oldala)

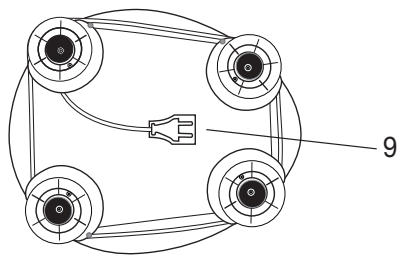

5. Használat



Üzembe helyezés



- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a dugaszoló tápegységet és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések.
- Mielőtt bedugja a lábágyba, teljesen töltsen fel meleg vízzel a töltési szintjelölésig (kb. 4-5 cm magasan).
- Ügyeljen arra, hogy a forgókapcsoló "0" állásban legyen, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja.
- A kábelt botlásmentesen helyezze el.

Vegyen fel kényelmes ülő testhelyzetet, és helyezze lábait enyhe nyomással a masszírozást segítő lábágyra. Soha ne álljon bele a lábágyba. A készülék elcsúszását a készülék alján lévő gumilábak akadályozzák meg.

Állítsa be most a forgatható kapcsolón a kívánt funkciót:

- Ki 0

- Vibrációs masszírozás + infravörös lámpa  


- Melegítés + pezsgő masszírozás  

- Melegítés + pezsgő és vibrációs masszírozás + infravörös lámpa    

Masszírozó görgők

Úgy érhet el különösen jó masszírozó hatást, hogy a lábait előre-hátra mozgatja a lábágyban beépített 4 masszírozó görgőn. Arra is lehetőség van, hogy kivegye a masszírozó görgőket. Ez úgy történhet, hogy a görgőket erősen felfelé húzza.

A görgők behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a görgőörgítő lefelé mutasson, amint az az ábrán látható.

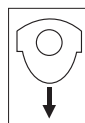

Cserélhető rátétek

A kívánt rátétet tegye rá a középen levő, erre a célra szolgáló szerkezetbe.

A **kefe-rátétet** arra lehet használni, hogy stimulálja a reflexzónákat a talpon.

A **masszázs-rátét** gondoskodik a talpak kellemes masszírozásáról, és segíti a vérkeringést.

A **szaruréteg-eltávolító** az elhalt hámsejtek és bőrkeményedések eltávolítására szolgál.

Útmutatás

- A talp egy bizonyos pontjának masszírozásával hatást lehet gyakorolni a test különböző szerveire. Azt tanácsoljuk azonban, hogy a reflexzóna pontjainak masszírozása előtt szerezzen be információt a szakirodalomból és orvosánál is, hogy elérje az Ön számára kívánt hatást.
- A lábfürdőt víz nélkül is lehet használni.

Használat után ürítse le a vizet a lábfürdő keskeny oldalán.

6. Ápolás és tárolás

Használat után csapvízzel mossa ki a készüléket.

A masszírozó pezsgő lábfürdőt enyhe – nem súroló – hatású háztartási tisztítószerrel is kimoshatja, mint pl. közömbös ecet.

A légszűrőket kiszáritásához a tisztítás után kapcsolja be kb. 1 percre víz nélkül a pezsgőfokozatot.

Útmutatás

- Ügyeljen rá, hogy ne hatoljon be víz a készülék belsejébe!
- A lábfürdőt eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.
- A készüléket ne hagyja hosszabb időn át nyitva állni.

7. Műszaki adatok

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
220-240 V ~ 50 Hz 120 W

8. Hulladék-ártalmatlanítás

A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

