beurer

FM 150 Pro



HU Vénatréner
Használati útmutató

CE 0197



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta vagy nem működik megfelelően. Ilyen esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy arra felhatalmazott kereskedő végezhet.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.
- Semmi esetre sem szabad a készüléket kinyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható annak kifogástalan működése. Ennek figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.


Tartalomjegyzék

1. A csomag tartalma 3
2. Jelmagyarázat 3
3. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók 4
4. Rendeltetésszerű használat 7
5. A készülék leírása 8
6. Üzembe helyezés 8
6.1 Üzembe helyezés elemes működés esetén 8
6.2 Üzembe helyezés hálózati egységről történő működés esetén 8
7. Alkalmazás 9
7.1 Alkalmazás megkezdése 9
7.2 A használat befejezése 11
8. Tisztítás és ápolás 12
8.1 A mandzsetták tisztítása 12
8.2 Tárolás 12
9. Mi a teendő probléma esetén? 12
10. Ártalmatlanítás 12
11. Műszaki adatok 13
12. Hálózati egység 13
13. Garancia/szerviz 13

1. A csomag tartalma

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérüléseit, és ellenőrizze a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a vénatréneren vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések, és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy hívja az útmutatóban megadott szervizvonalat.

1 x db jobb lábmandzsetta
1 x db bal lábmandzsetta
1 x jobb combmandzsetta
1 x bal combmandzsetta
2 x 2 levegőtömlő
(1 fehér és 1 szürke készlet)
1 x Kézi kapcsoló
1 x Tárolótáska
4 x AA elem (1,5 V)
1 x Hálózati egység
1 x Ez a használati útmutató


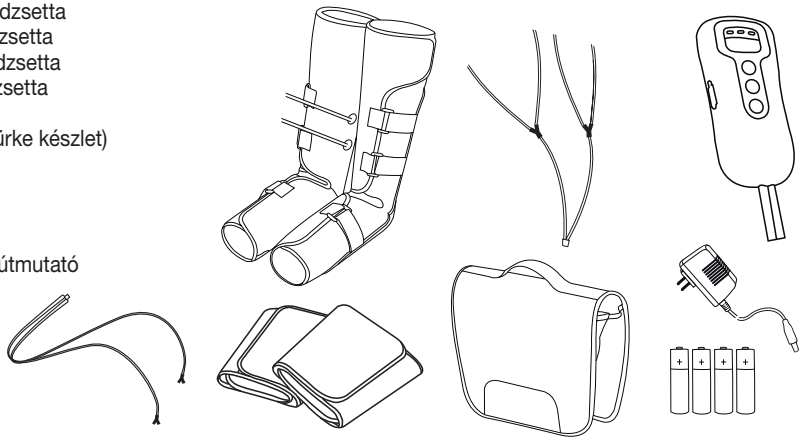


2. Jelmagyarázat

A készüléken, a használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék típustábláján a következő szimbólumok használatosak:

⚠	**FIGYELMEZTETÉS** Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ.
⚠	**FIGYELEM** Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére.
ⓘ	**Megjegyzés** Fontos információkra vonatkozó megjegyzések.
	Vegye figyelembe a használati útmutatót
	Gyártó
	II. védelmi osztály

Transportation	Megengedett szállítási hőmérséklet és páratartalom
	Hálózati egység
IP20	12,5 mm átmérőjű és annál nagyobb idegen testek ellen védett
IP22	≥12,5 mm átmérőjű idegen testek és függőlegestől eltérően csepegő (fröccsenő) víz ellen védett készülék
⎓	Egyenáram
SN	Sorozatszám
	Alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás
	Csak beltéri használatra alkalmas

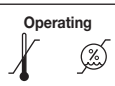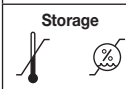	BF típusú alkalmazói rész		Ártalmatlanítás az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelve szerint
	Megengedett üzemi hőmérséklet és páratartalom		Megengedett tárolási hőmérséklet és páratartalom
	**CE-jelölés** A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelveknek.		Jelölés a csomagolóanyag azonosításához. A = anyag rövidítése, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton
	Kötegkód		Unique Device Identifier (UDI) – jelölés az egyértelmű termékazonosításhoz
	Gyógyászati termék		Cikkszám
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	A veszélyes anyagot tartalmazó elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.	**ta=40°C**	Névleges környezeti hőmérséklet
	Gyártás dátuma		A forgalmazó szimbóluma
	Egyenáramú csatlakozó polaritása		Ne használja a hálózati adaptert, ha a csatlakozódugó sérült.
	Biztonsági leválasztó transzformátor, zárlatbiztos		AC mért teljesítményfelvétel
	6. szintű energiahatékonyság		DC névleges kimeneti teljesítmény

Megjegyzés

A vénatréner a mandzsetták tisztítását követően alkalmas az újbóli használatra.

3. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a vénatrénert
- a lábakat érintő kóros elváltozások vagy sérülések esetén (pl. törékeny csontozat, nyílt sebek, stb.),
- terhesség alatt,
- alvás közben,
- állatokon,
- olyan tevékenységek közben, amelyeknél veszélyesek lehetnek az előre nem látható reakciók,
- olyan szerek bevétele után, amelyek korlátozzák az észlelőképességét (pl. fájdalomcsillapító gyógyszerek, alkohol),
- 30 percnél hosszabb ideig (túlhevülés veszélye), és az újabb használat előtt hagyja legalább 20 percig hűlni a vénatrénert,
- akut betegeken vagy orvosi kezelés alatt álló személyeken.

Kérdezze meg kezelőorvosát, hogy valamennyi meglévő akut vagy alapbetegsége mellett nyugodt szívvel használhatja-e a vénatrénert, különösen az alábbi esetekben:
- ha súlyos betegségben szenved vagy műtötték a lábát.
- ha akut nyílt vagy zárt sérülése van a lábszárán vagy a lábfején.
- ha műtéti beavatkozást hajtottak végre a lábszárán vagy a lábfején, és a gyógyulási folyamat orvosi szempontból még nem zárult le.
- ha fennáll annak a gyanúja, hogy compartment szindrómás az alsó lábszára.
- ha akut bőrbetegségben szenved a lábszárán vagy lábfején.
- ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy egyéb segédeszközt visel.
- ha trombózisa van, vagy trombózis gyanúja áll fenn Önnél, többek között ha vénás trombózisa volt a lábszárában, illetve tudomása van arról vagy fennáll a gyanúja annak, hogy jelenleg ez a helyzet.
- ha artériás elzáródása van, függetlenül attól, hogy hol található a diagnosztizált érszűkület.
- ha cukorbeteg.
- ha ismeretlen eredetű fájdalmai vannak.
- ha akut gyulladás áll fenn Önnél.
- szívelégtelenség esetén, különösen ha az lábszárvizenyőt okoz Önnél.
- előrehaladott artériás megbetegedés esetén.
- tüdőödéma esetén.
- ha magas a vérnyomása.
- ha rosszindulatú daganata van, vagy fennáll ennek a gyanúja.
- ha nyirokkeringési zavar áll fenn a lábszárában és/vagy lábfejében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Jelen terméket az égési sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében tilos nagyfrekvenciás készülékekkel együtt használni.
- Biokompatibilitás. A pácienssel vagy felhasználóval kapcsolatba kerülő anyagok semelyike sem hordoz kockázatot a használóra nézve. Termékeink megszokott anyagokból készülnek.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érjen az egyenáramú tápegységhez.
- Használat közben helyezze a kézi kapcsolót a test mellé.
- A termékkel bánjon körültekintően, hogy az nehogy leessen és Ön nehogy megsérüljön.
- Az alábbi listán szereplő személyeknek a termék használatát megelőzően fel kell keresniük orvosukat: Terhes, menstruáló nők, érzékeny bőrű személyek, szívbetegek, vérnyomás-rendellenességben, rosszindulatú daganatban, agyi érrendszeri betegségben szenvedők, akut megbetegedésben szenvedő, vagy orvosi kezelés alatt álló személyek.
- A bőr érzékelőképessége vagy nyomásérzékelő képesség zavarában szenvedők jelen terméket nem használhatják.
- Ne használja a terméket fürdés vagy alvás közben.
- Agyvérzésben szenvedő páciensek: Ne használja a terméket labilis állapotban levő betegnél. Másodlagos megbetegedésekben szenvedő betegek a készüléket csak orvosi felügyelet mellett használhatják.
- Gennyes gyulladásos megbetegedésekben, akut szepszisben és folyamatos hiperthermiában szenvedők nem használhatják a terméket.
- Akut szív- és érrendszeri, valamint agyi érrendszeri betegségekben szenvedők nem használhatják a terméket.
- A terméket kizárólag a lábain és talpain használja. A lábakon és talpakon fellépő bőrbetegségekben szenvedők nem használhatják a terméket.
- A termék használata során ne járjon vagy mozogjon, mivel ez a páciens sérüléséhez vezethet. Ezenfelül a termék sérülését is okozhatja.

- Ne használja a terméket gyermekek vagy a tudat valamely zavarában szenvedő egyének közelében.
- Ha a termék használata során a felhasználó megsérülne, a használatot azonnal meg kell szakítani, és fel kell keresnie orvosát.
- Ne használja a terméket egyéb orvosi elektromos készülékekkel, pl. szívritmus-szabályozókkal, szív-tüdő gépekkel vagy egyéb létfenntartó elektromos készülékekkel, elektrokardiográfokkal és egyéb orvosi elektromos készülékekkel együtt. Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyt okozhat.
- A hibák és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne szedje szét, javítsa, vagy módosítsa ezt a terméket.
- Vészhelyzet esetére a terméket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozót egyszerűen oldalra el lehessen távolítani.

FIGYELEM

- Ha a vásárló jelen terméket nagyfrekvenciás sebészeti készülékekkel együtt használja, az a készülék károsodásához vezethet. Ha a terméket terápiás rövidhullámú vagy mikrohullámú készülékek közelében (1 m) használja, a termék adott esetben nem működik megbízhatóan.
- A gyártó engedélye nélkül ne hajtson végre módosításokat a készüléken.
- Válassza le a terméket annak használatát követően vagy használaton kívül az elektromos hálózatról.
- Ne használja a terméket magas hőmérséklettel rendelkező, gyulladásveszélyes, elektromágneses sugárzással vagy magas páratartalommal rendelkező helyiségekben.

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés

Minden más elektromos készülékhez hasonlóan ezt a vénatrénert is óvatosan kell használni, hogy elkerülhetők legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.

Ezért a vénatrénert
- csak a vele együtt szállított hálózati egységgel és a típustáblán megadott hálózati feszültséggel használja,
- sohase használja, ha láthatóan sérült a készülék vagy valamelyik tartozéka,
- sohase használja vihar esetén.

Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a vénatrénert és válassza le az elektromos hálózatról. Soha ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a hálózati egységet a dugaszolóaljzatból. Soha ne tartsa vagy hordozza a készüléket a kábelénél fogva. Tartson elegendő távolságot a kábelek és meleg felületek között. Ne szorítsa be, törje meg, vagy csavarja el a kábelt. Ne szúrjon bele tűt vagy éles tárgyakat. Semmilyen körülmények között se nyissa fel a kézi kapcsolót.

Gondoskodjon arról, hogy a készülék, a kézi kapcsoló és a kábel ne érintkezhessen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal.
Csak száraz, belső helyiségekben használja a készüléket (pl. fürdőkádban, szaunában SOHA).

Sohase nyúljon a vénatréner után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszoló aljzatból. Ne használja a vénatrénert, ha látható sérülések vannak rajta vagy a tartozékain. Ne érje ütés a készüléket, és ne ejtse le.

FIGYELMEZTETÉS: Javítás

Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély

A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén adott körülmények között tűzveszély állhat fenn!
Ezért a készüléket ne használja
- letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt,
- benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Elemek

- Ha az elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.

- Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.
- Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtartót.
- Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Az elemeket mindig egyidejűleg cserélje ki.
- Ne használjon akkumulátorokat!
- Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.

⚠ FIGYELEM: Használat

Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek megtörve a levegőtömlők.
- Ne üljön vagy álljon teljes súllyal a lábmandzsettákra. Ne tegyen semmit a lábmandzsettákra vagy a kézi kapcsolóra.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.

4. Rendeltetésszerű használat

A vénatrénert kizárólag emberek lábán szabad használni. A vénatréner kizárólag **saját** használatra szolgál. A vénatréner **NEM** alkalmas kereskedelmi használatra. Nem helyettesíti az orvosi kezelést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készüléket kizárólag arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és úgy, amilyen módon az ebben a használati útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet. A gyártó cég nem felel a szakszerűtlen vagy helytelen használatból származó károkért.

Használati tudnivalók
- A vénás vérkeringés javítására.
- A visszerek és seprűvénák kialakulásának megelőzésére.
- A lábak elnehezedésének és duzzanatainak csökkentésére.
- Sport miatt fellépő izomfeszülés kezelésére.
- Sportsérülések, például zúzódások és ficamok kezelésére.
- Véraláfutás kezelésére.


Használat helye: zárt térben

Ha lábai elnehezültek, duzzadtak, és ezzel együtt járó vénás panaszai vannak, akkor kérjük, hogy kizárólag a csomagban található szürke tömlőt használja, a combmandzsetták használatát pedig mellőzze (az összeszerelés leírását a 8.1. fejezet 4.b pontja alatt találja).

Kérjük, hogy csak akkor használja a csomagban található combmandzsettákat és a hozzájuk tartozó fehér tömlőket (az összeszerelés leírását a 8.1. fejezet 2–4.a pontja alatt találja), ha fizikailag egészséges, valamint ha lábszára nem duzzadt és nincsenek rajta sérülések. A combmandzsetták használatával ellazíthatók az izmok, és javul a vérkeringés.

5. A készülék leírása

1. Levegőbeömlő („in”)
2. Áramcsatlakozás
3. Levegőkiömlő
4. BE/KI gomb
5. Levegőkieresztés gomb
6. Stop gomb*
7. 10/20/30 perces időzítő gombbal
8. Levegőtömlők (fehér) a combmandzsettákkal együtt történő használathoz
9. Levegőtömlők (szürke) a csak az alsólábszár-mandzsettákkal történő használathoz
10. Levegőtömlő csatlakozó

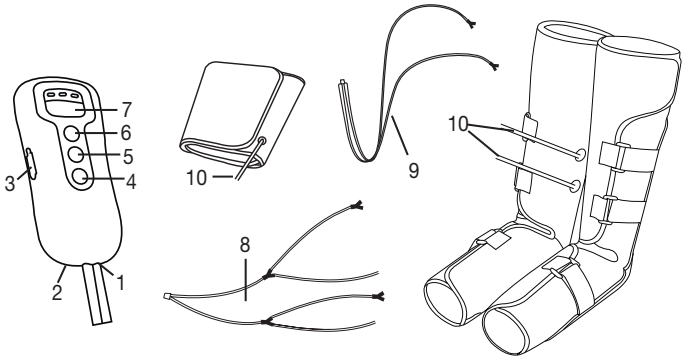

(*A stop gomb megszakítja a felfújást kellemetlen és magas nyomás esetén)

6. Üzembe helyezés

- Távolítsa el a csomagolást.
- Távolítsa el a láb- és combmandzsetták tépőzárján lévő szürke védőfóliát.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati egységet és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.
- A vénatréner elemről (4 x 1,5 V-os AA LR06 típusú alkáli elem) vagy a csomagban található hálózati egységről működtethető.

Megjegyzés

A készüléket a csomagban lévő hálózati adapterrel vagy elemekkel üzemeltetheti. A fenntarthatóság érdekében javasoljuk a hálózati adapter használatát.

6.1 Üzembe helyezés elemes működés esetén


1. Nyissa ki a kézi kapcsoló hátoldalán található elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be 4 darab 1,5 V-os AA (LR06 típusú alkáli) elemet. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az elemek a jelölésüknek megfelelően, a helyes polaritással legyenek behelyezve. Ügyeljen az elemtartó rekeszben látható rajzra. Ne használjon újratölthető elemeket.
3. Zárja vissza a kézi kapcsoló hátoldalán található elemtartó rekeszt úgy, hogy az hallhatóan és érezhetően bekattanjon.

6.2 Üzembe helyezés hálózati egységről történő működés esetén

Megjegyzés

Mielőtt hozzálátna a hálózati egységről történő működés melletti üzembe helyezéshez, győződjön meg róla, hogy nincsen elem a kézi kapcsolóban.

1. Csatlakoztassa a hálózati egységet a kézi kapcsolóhoz az ábrán látható módon.
2. A hálózati egység másik végét dugja be egy megfelelő hálózati aljzatba.
3. A vénatréner most használatra kész állapotban van.

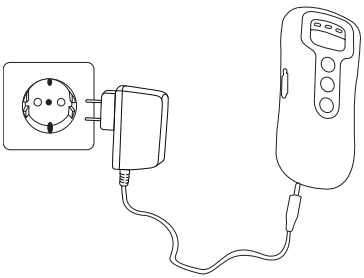

7. Alkalmazás


7.1 Alkalmazás megkezdése

FIGYELEM:

- Használat közben kerülje a mandzsetták tépőzárjának kioldását, mert ez negatívan befolyásolhatja a készülék működését. Csak akkor oldja ki a mandzsetták tépőzárját, ha használat közben a lábaira ható nyomás kellemetlenné válik, vagy nyomja meg a stop gombot.
- Ügyeljen arra, hogy a használat során ne legyenek megtörve a levegőtömlők.
- Ügyeljen rá, hogy használat során a mandzsettákat ne fedje le takaróval vagy más tárggyal.

1. Tartsa be az „Üzembe helyezés” fejezetben foglalt utasításokat.


2. Egymás után helyezze a láb- és combmandzsettákat az ábrán látható módon szorosan a csupasz lábára, vagy szűk ruhaneművel (pl. harisnya) fedett combjára, alsó lábszárára vagy lábfejére. A mandzsettákat csak olyan szorosan helyezze fel, hogy két ujja beférjen alájuk. Ha túl szorosnak érzi a mandzsettákat, helyezze fel azokat úgy, hogy a nyitott kézfeje még beférjen alájuk.

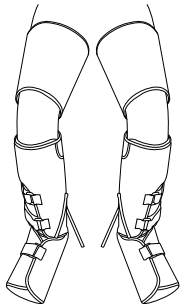

FIGYELEM:

Ha csak az alszólábszár-mandzsettákat használja, a combmandzsettákat ne helyezze fel.

3. Az optimális eredmény elérése érdekében a használat során tartsa lábait enyhén hajlított szögben/megemelve, hogy ezzel elősegítse a véráramlást.
- A bal lábra való láb- és combmandzsettát annak belső oldalán egy „L” betű jelöli.
- A jobb lábra való láb- és combmandzsettát annak belső oldalán egy „R” betű jelöli.

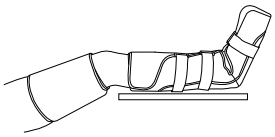






4. a. A comb- és az alsólábszár-mandzsetták használata

Csatlakoztassa a fehér levegőtömlőket a mandzsettákhoz. Ügyeljen rá, hogy a levegőtömlők szorosan illeszkedjenek, és ne tudjanak elcsúszni.

Csatlakoztassa a levegőtömlő másik végét a kézi kapcsoló levegőbeömlőjéhez („in”).

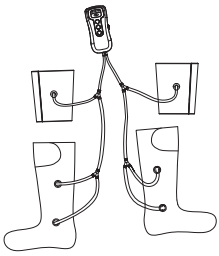


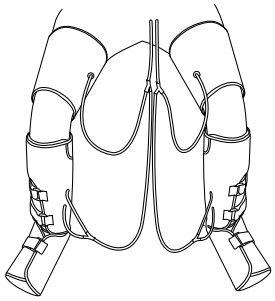

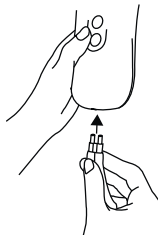

4. b. Az alsólábszár-mandzsetták használata

Csatlakoztassa a szürke levegőtömlőket az alsólábszár-mandzsettákhoz (1.). Ügyeljen rá, hogy a levegőtömlők szorosan illeszkedjenek, és ne tudjanak elcsúszni.
Csatlakoztassa a levegőtömlő másik végét a kézi kapcsoló (2.) levegőbeömlőjéhez („in").

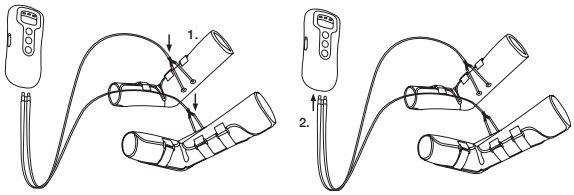


FIGYELEM

Ha váltogatni szeretné a két (a combmandzsettás és a combmandzsetta nélküli) alkalmazási módot, akkor ügyeljen arra, hogy az alsólábszár-mandzsettán található két rövid fehér tömlővéget ne vegye le. Ezekre ugyanis mindkét alkalmazási módnál szükség van.


4. Nyomja meg a BE/KI gombot a vénatréner bekapcsolásához. Amíg a készülék be van kapcsolva, a 20 perces időzítő LED világít.
5. Vegyék figyelembe, hogy az időzítő-beállítás módosításával az időzítő újrakezdi a számlálást.

FIGYELEM


A javasolt használati idő 20-30 perc. Ennél hosszabb használat a lábak zsibbadásához és a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

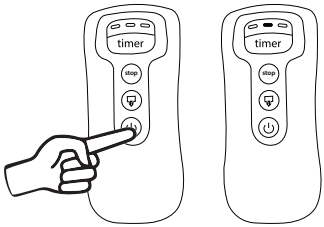


6. Állítsa be a levegőnyomás szabályozójával a kívánt intenzitást. Először kezdje a legalacsonyabb fokozattal, hogy lassan hozzászokjon a masszírozáshoz. Az optimális hatáshoz a beállított intenzitást erősnek, de még kellemesnek kell éreznie.

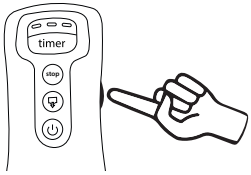

7. Nyomja meg a „Timer" gombot az időbeállítások közötti váltáshoz – 10 perc, 20 perc, és 30 perc. Az alapértelmezett érték 20 perc. Ha a hátralevő idő 5 perc, az aktuális idő kijelzése lassan villog, ha a hátralevő idő 1 perc, az aktuális idő kijelzése gyorsan villog.

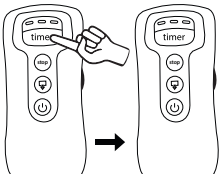

8. Ha használat közben túl erős vagy kellemetlen nyomó érzés jelentkezik, nyomja meg a „Stop" gombot a használat megszakításához.

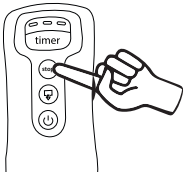

Megjegyzés





A vénatréner egymás után és felváltva elkezdi a lábak masszírozását. A lábak egyidejű masszírozására nincs lehetőség. Ez nem jelenti a készülék hibás működését.

A készülékben kikapcsoló automatika van, amely maximum 30 perc üzemidőre van beállítva.


Ha az elemek majdnem lemerültek, az időzítő LED-ek elkezdenek jobbról balra villogni. A készülék pár másodperc után kikapcsol, és egy 30 másodperces készenléti állapotba lép. Ez idő alatt mind a 3 időzítő LED világít.

7.2 A használat befejezése

A használat befejezéséhez először kapcsolja ki a készüléket, majd engedje ki a levegőt a mandzsettákból. Ehhez a következőképpen járjon el:

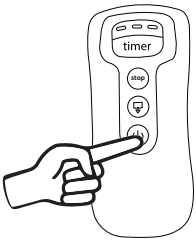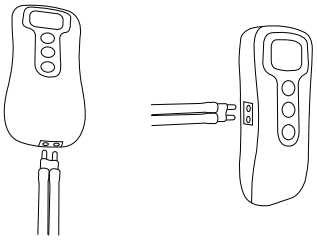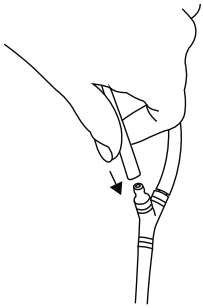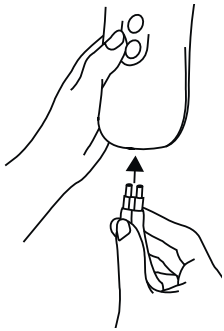1. A kézi kapcsoló BE/KI gombjának megnyomásával kapcsolja ki a vénatrénert. A beállított időzítő LED kialszik. A készülék ekkor 30 másodpercre készenléti üzemmódba kapcsol. Ezalatt mindhárom időzítő LED világít.	
2. A 30 másodperces készenléti üzemmód alatt húzza ki a levegőtömlőt a kézi kapcsolóból és dugja be az oldalsó levegőkiömlőbe (⇩) a készi kapcsolón, és nyomja meg a levegőkieresztő gombot [5]. Ezalatt mindhárom időzítő LED villog. Újra kialszanak, ha a folyamat befejeződik.	
3. a. Oldja ki a tépőzárakat, és vegye le a mandzsettákat. Húzza ki a fehér levegőtömlőket az „Y-csatlakozónál" a lábmandzsettákból úgy, hogy a rövid fehér tömlővégek az ábrán látható módon a lábmandzsettákba dugva maradjanak. A közvetlenül a combmandzsettáknál található csatlakozóból is húzza ki a levegőtömlőt. Ha a készüléket a hálózati egységgel üzemeltette, húzza ki azt a hálózati aljzatból és a kézi kapcsolóból.	 

3. b. Oldja ki a tépőzárakat, és vegye le a mandzsettákat. Húzza ki a szürke levegőtömlőket az „Y-csatlakozónál" a lábmandzsettákból úgy, hogy a rövid tömlővégek az ábrán látható módon a lábmandzsettákba dugva maradjanak. Ha a készüléket a hálózati egységgel üzemeltette, húzza ki azt a hálózati aljzatból és a kézi kapcsolóból.

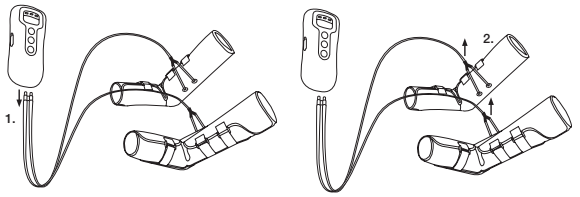

8. Tisztítás és ápolás

8.1 A mandzsetták tisztítása

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a levegőtömlőket (a rövid tömlővégek kivételével) a mandzsettákból és a kézi kapcsolóból.
- Tisztítsa meg a mandzsettákat puha, kissé megnedvesített ronggyal. A tisztításhoz ne használjon vegyi tisztító- vagy súrolószert.
- Csak akkor használja újra a mandzsettákat, ha azok már teljesen megszáradtak.

8.2 Tárolás

- Vegye ki az elemeket a kézi készülékből, ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket. A szivárgó elemek károsíthatják a készüléket.
- Ne törje meg élesen a levegőtömlőket és a mandzsettákat.
- A készüléket hűvös, jól szellőző helyen tárolja annak eredeti csomagolásában.

9. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Lehetséges okok	Elhárítás
A mandzsetták nem fújódnak fel	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket a kézi kapcsolóban.
	Nincs bedugva a hálózati egység	Csatlakoztassa a hálózati egységet alkalmas fali aljzatba.
	Nincs megfelelően csatlakoztatva a levegőtömlő	Helyezze be újból a levegőtömlőket.
Használat közben villogni kezdenek az időzítő LED-ek, a készülék pedig kikapcsol	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket a kézi kapcsolóban.

Ha problémáját nem találja az alábbi felsorolásban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

10. Ártalmatlanítás

A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Erre Önt törvény kötelezi.
A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek:
Pb = az elem ólmot tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.



11. Műszaki adatok

Mandzsettanyomás	max. 120 mmHg (a 9.1. fejezetben leírt helyes használat esetén)
Mandzsetta mérete	29–53 cm
Időzítő időtartama	10–30 perc ±10%-os eltéréssel
Tápfeszültség elemes üzemmód esetén	6,0 V DC (4 x 1,5 V ⎓ AA elem (alkáli LR06))
Megengedett üzemi feltételek	+5 °C–+40 °C, 15–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Megengedett tárolási feltételek	-25 °C–+70 °C, 0–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Megengedett szállítási feltételek	-25 °C–+70 °C, 0–93% relatív páratartalom (nem kondenzáló), 700–1060 hPa környezeti nyomás.
Méretek	Lábmandzsetta: 61 x 67 x 0,5 cm Combmandzsetta: 85 x 23,5 x 0,5 cm Kézi kapcsoló: 17 x 7,7 x 3 cm
Összsúly	kb. 1700 g (hálózati egység nélkül)
Érintésvédelmi osztály	
Osztályozás	BF típus 

A sorozatszámot a készüléken, vagy az elemtartó rekesz belsejében találja.

12. Hálózati egység

Tápfeszültség hálózati üzem esetén	Bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Kimenet: 6,0 V DC, 0,5 A, 3,0 W
Polaritás	
Érintésvédelmi osztály	

Elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos tudnivalók

- Ez a készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK EU-irányelvnek, illetve az EN 60601-1-2 európai irányelvnek (összhangban a következővel: CISPR 11, IEC61000-4-2, IEC61000-4- 4, IEC61000-4- 5, IEC61000-4- 6, IEC61000-4- 11, IEC61000-4-8) és speciális óvintézkedések vonatkoznak rá az elektromágneses összeférhetőséget illetően. A készülék az ebben a használati útmutatóban leírt összes környezetben történő használatra alkalmas, beleértve az otthoni használatot.
- A készülék az ebben a használati útmutatóban leírt összes környezetben történő használatra alkalmas, beleértve az otthoni használatot.
- A készülék elektromágneses zavarok közelében csak korlátozott mértékben használható. Azok következtében pl. hibajelzések vagy a kijelző/készülék hibája léphetnek fel.
- Kerülni kell ezen készülék használatát közvetlenül egyéb készülékek mellett, illetve egyéb készülékekkel egymásra rakva, mivel az hibás működést idézhet elő. Amennyiben mégis elkerülhetetlenné válna a fent leírtak szerinti használat, ezen készüléket és a többi készüléket is ellenőrizni kell helyes működés szempontjából.
- A készülék gyártója által ajánlottaktól vagy rendelkezésre bocsátottaktól eltérő tartozékok használata megnövekedett elektromágneses sugárzással vagy a készülék elektromágneses stabilitásának csökkenésével járhat, és hibás működéshez vezethet.
- Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék teljesítményének csökkenésével járhat.

13. Garancia/szerviz

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási jegyen talál.

Tévedések és változtatások joga fenntartva

BEURER UK Ltd.
Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North, WA3 2SH Lowton, United Kingdom

Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com, www.beurer-healthguide.com

EU REP Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Tel.: +31644168999

Shenzhen Pango Medical Electronics Co., Ltd.
Address: Building 2, No. 25 Fenghuang Road, Industrial Zone,
Xikeng First Village, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen,
518115 Guangdong, P. R. China

CE 0197

643.27_FM150-Pro_medical-device_2025-05-13_12_IM2_BEU_HU

Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

GYÓGYEXPRESSZ